

**Характеристики:**

Материал: ABS-пластик, металл.

Цвет: белый, зелёный.

Размер: 9,2x8x7,4 см

Работает от 2 батареек типа «AA» (не входят в комплект).

1.5V, 3W.

Комплектация: мойка, инструкция.

**Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.**

Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel.

Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059

www.bradex.co.il

**Импортер на территории РФ:**

ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru

**Импортер на территории Республики Беларусь:**

ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д. 9 комн. 34/4. УНП 192409754. Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by

**Страна происхождения: Китай**

**Изготовитель:**

Джецзян Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед.

Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708. Тел: +86-574-6560937, факс: +86-574-6560938  
e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com

**Международная торговая марка «BRADEX».**

Per. №1419183


Израиль - Per. №204012

Россия - Per. №444287, №683532

**Гарантийный срок: 1 год.**

**Срок эксплуатации: 3 года с начала эксплуатации.**

**Дату производства смотрите на упаковке.**

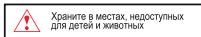

ВИДЕО О ТОВARE  
ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ



# МОЙКА УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЧИСТИТЕЛЬ



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Артикул KZ 0104

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мойка ультразвуковая «Очиститель» - компактное и эффективное устройство для очистки ювелирных украшений из золота, серебра, платины с драгоценными камнями и без них, бижутерии, а также ухода за съемными зубными протезами в домашних условиях.

Достаточно всего 15 минут, чтобы справиться с самым стойким налетом без лишних усилий. Загрязнения удаляются с помощью ультразвуковых волн с частотой в 5800 колебаний в минуту. Подобное интенсивное воздействие позволяет провести тщательную гигиеническую очистку предметов, включая внутренние скрытые части изделий. После очистки им возвращается прежний вид, восстанавливается блеск.

Ультразвуковой очиститель прост и удобен в использовании, не требует особых условий хранения. Благодаря своему компактному размеру, устройство прекрасно впишется в любой домашний интерьер.

### Преимущества:

- Очистение изделий из золота, серебра, платины, а также зубных протезов.
- Удаление даже самого стойкого налета за 15 минут.
- Эффективная гигиеническая очистка мелких деталей.
- Простота в использовании – всего одна кнопка.
- Компактный, мобильный формат.
- Беспроводное использование.

### ТОВАР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ.

  BRADEXRUSSIA  
  BRADEXMOSCOW



Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с инструкцией.

### ОПИСАНИЕ:

Ультразвуковая мойка для ювелирных украшений, бижутерии, съемных зубных протезов.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Вставьте пальчиковые батарейки в специальный отсек (батарейки не входят в комплект).
2. Налейте в контейнер воду комнатной температуры или асептическое средство. Для очищения зубных протезов добавьте обычное средство для замачивания зубных протезов.
3. Положите ювелирное украшение, зубной протез в устройство. Важно, чтобы изделие было полностью в жидкости.
4. Закройте крышку и включите аппарат, переведя тумблер в положение «ON».
5. Через 15 минут выключите устройство, переведя тумблер в положение «OFF».
6. Откройте крышку и достаньте очищенное изделие из контейнера.

### ХРАНЕНИЕ И УХОД:

- Не требует особых условий для хранения.
- При регулярном использовании необходимо вовремя менять батарейки.

### СПОСОБЫ ОЧИСТКИ:

- Промывайте контейнер после каждого использования под проточной водой с обычным моющим средством.
- Не мойте само устройство непосредственно в воде, так как это может повредить аппарат.
- Не используйте резкие или едкие очистители, испаряющиеся растворители.

### ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

