

- Рекомендуемая длительность сеанса массажа не должна превышать 30 минут.
- Рекомендуется проводить массаж за 30 минут до приема пищи или же через час после, поскольку активный массаж ног может стимулировать выработку излишнего желудочного сока.
- Во время сеанса массажа рекомендуется избегать употребления каких-либо напитков.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ:

- Перед очищением массажера, отключите устройство от сети.
- Не используйте для очищения корпуса массажера жесткие металлические щетки, различные растворители и полироли, содержащие спирт и бензол.
- Рекомендуется протирать корпус массажера сухой хлопковой тряпкой.
- Если Вы не используете массажер в течение долгого времени, рекомендуется хранить его в чистом и сухом помещении. Не размещайте устройство на хранение в холодном помещении.
- Берегите массажер от попадания на него прямых солнечных лучей, источников открытого огня и разогретых поверхностей.

Внимание!

- Не используйте массажер при наличии у Вас следующих заболеваний или состояний: остеопороз, умственная отсталость, эпилепсия, заболевания сердца, нарушение кровообращения или плохая свертываемость крови, высокая температура или лихорадка, индивидуальная непереносимость материалов, из которых произведен массажер.
- Не используйте массажер во время беременности.
- Не рекомендуется использовать массажер, если у Вас имеются встроенные кардиостимуляторы, сердечные имплантаты или иные электронные аппараты, стимулирующие работу внутренних органов.


04

Характеристики:
 Мощность: 40 Вт.
 Температура нагрева во время работы: от +10 °С до 40°С.
 Работает от сети 220 В.
 Среднее время работы автоматического режима: 15 мин.
 Скорость: высокая, средняя, низкая.
 Цвет KZ 0125: чёрный.
 Цвет KZ 0182: красный.

Материал: металл, пластик, текстиль, ТПР.
 Комплектация: массажер для стоп и лодыжек «БЛАЖЕНСТВО», инструкция по эксплуатации, пульт управления.

Срок эксплуатации: 1 год.
 Гарантийный срок: 1 год.
 Дату производства смотрите на упаковке.

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.
 Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel. Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059. www.bradex.co.il
 Импортёр на территории РФ: ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru
 Импортёр на территории Республики Беларусь: ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д. 9 комн. 34/4. УНП 192409754. Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by
 Страна происхождения: Китай
 Изготовитель: Джецзян Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед. Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708. +86-574-6560937, факс: +86-574-6560938. zhejiangnewvision.china@gmail.com
 Международная торговая марка «BRADEX».
 Рег.№1419183
 Израиль - Рег. №204012
 Россия - Рег. №444287, №683532

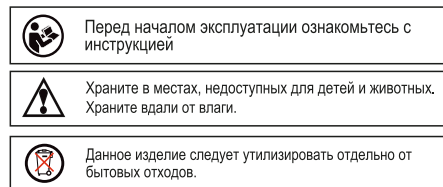

05



МАССАЖЕР ДЛЯ СТОП И ЛОДЫЖЕК БЛАЖЕНСТВО



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KZ 0125
 KZ 0182



BRADEXRUSSIA
 BRADEXMOSCOW

Массаж, проводимый в домашних условиях с помощью массажера для стоп и лодыжек «БЛАЖЕНСТВО», обеспечит профилактику всевозможных заболеваний и улучшит Ваше самочувствие! Принцип работы массажера «БЛАЖЕНСТВО» основан на том, что валики, встроенные в его платформу, воздействуют на биологически активные точки, находящиеся на стопе. Стимуляция данных точек позволяет улучшить кровообращение, снабдить внутренние органы необходимыми веществами, а проводимый прямо перед сном массаж снимает напряжение, помогает справиться со стрессами и бессонницей.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАССАЖЕРА


1. Рекомендуется применять массажер за 30 минут до приема пищи или же через 1 час после приема пищи, так как активный массаж ног может стимулировать выработку излишнего желудочного сока, что не является полезным для организма.
2. Рекомендуемая длительность массажа должна составлять 30 минут.
3. Во время сеанса массажа рекомендуется избегать употребления каких-либо напитков (чай, вино и т.д.)

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Сочетание современных технологий и традиционной медицины: При создании массажера «БЛАЖЕНСТВО» были соединены принципы точечной медицины, новейшие научные исследования и достижения в области электроники.
- Двойное воздействие: Массажер осуществляет воздействие сразу на обе стопы, что максимально расслабляет и одновременно приводит организм в тонус.

01

СИСТЕМА РАБОТЫ (ФУНКЦИИ КНОПОК):

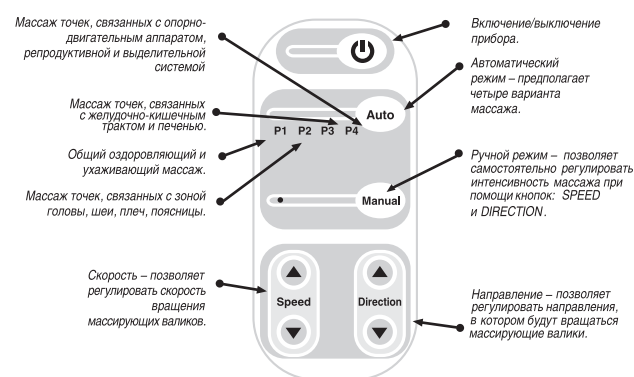

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Подключите массажер для стоп и лодыжек «БЛАЖЕНСТВО» к сети.
2. Чтобы запустить работу массажера, нажмите кнопку включения/выключения прибора.
3. С помощью панели управления настройте необходимый режим работы массажера.
4. Поместите ступни на платформы массажера.
5. Массажер будет осуществлять работу в области пальцев ног, свода стоп, лодыжек. Во время массажа Вы можете плавно передвигать ноги на платформах, чтобы получать массаж именно в той области, с которой требуется снять боль, отек, напряжение, ощущение скованности.

02

Примечание: Каждый сеанс массажа автоматически запрограммирован на 15 минут.
 б. После окончания сеанса массажа выключите массажер.

Примечание: Выключение массажера возможно осуществлять несколькими способами:

- а) запрограммированное отключение в автоматическом режиме происходит после пяти минут работы массажера;
- в) временная приостановка работы массажера при нажатии на кнопку включения/выключения прибора; Если временная приостановка длится более десяти минут, то массажер отключается автоматически
- с) полное выключение массажера при нажатии и удерживании более пяти секунд кнопки включения/выключения прибора.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Убедитесь, что технические параметры массажера соответствуют напряжению электросети, к которой подсоединен прибор.

ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СЕАНСА ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЕ МАССАЖЕР ОТ СЕТИ.

03

- Во избежание удара электрическим током, не подключайте массажер к сети мокрыми или влажными руками.

- Никогда не пытайтесь отключить массажер путем вытаскивания шнура из розетки без предварительного нажатия на кнопку включения/выключения прибора, поскольку подобные манипуляции могут вызвать неполадки в работе устройства.

- Во время использования массажера не накрывайте его одеялом, пледом или прочими вещами во избежание пожара или повреждения прибора.
- Если массажер имеет какие-либо повреждения, немедленно прекратите его эксплуатацию.
- Массажер необходимо использовать исключительно в помещении, однако запрещается использовать прибор в ванной комнате.
- Не помещайте на платформу массажера мокрые или влажные ноги.
- Запрещается вставать на платформу прибора.
- Не вставляйте во вращающиеся валики массажера посторонние предметы.