

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

- Каждый раз после использования, во время обслуживания и очистки отключайте массажер от сети.
- Не оставляйте прибор включенным без присмотра.
- Выключите массажер, если почувствуете запах горения.
- Не дотрагивайтесь до вилки мокрыми руками.
- Не используйте во влажных помещениях (ванная комната).
- Не наносите на массажер и насадки эфирные масла, пестициды.
- Держите шнур вдали от нагревательных приборов и высоких температур.
- Не используйте при температуре выше 40°C.
- Не используйте поврежденный адаптер, если повреждены шнур или вилка, требуется произвести ремонт.
- Регулярно удаляйте пыль с адаптера.
- Не подвергайте устройство длительному воздействию солнечных лучей.
- Не вносите самостоятельно изменения в конструкцию прибора.
- Используйте вдали от детей.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте на локтях, коленях и груди.
- Не используйте вблизи воспламеняющихся веществ.
- Устройство запрещается мыть в воде.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Диабет, флебит, тромбоз, новообразования, воспалительные процессы, эпилепсия, беременность, остеопороз, воспаления, травмы, сердечные заболевания, гипертония, опухолевые процессы, мочекаменная болезнь, клапаны в сердце.
 О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.
 Товар не является медицинским изделием.
 Разработан для расслабляющего массажа.
 Не использовать при ожогах и других поражениях кожи.

СПОСОБЫ ОЧИСТКИ ПРИБОРА:

При загрязнении отключите прибор из сети, протрите слегка влажной тряпкой с нейтральным моющим средством. Не используйте агрессивные моющие средства.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

ВОЗМОЖНАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Устройство не работает	вилка неплотно подключена к розетке	вставьте вилку в розетку полностью
Массажер слишком горячий	слишком долгое применение массажера	отключите массажер на 30 минут

ТОВАР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: АБС пластик, металл.
 Цвет: черный, золотой.
 Размер: 43x12,5x16,7 см.
 Входное напряжение АС 100-240 В, 50-60 Гц.
 Номинальное напряжение: DC8.4V 1A.
 Номинальная мощность: 24 Вт.
 Частота вибрации:
 1 уровень 2800 об/мин.
 2 уровень 3400 об/мин.
 3 уровень 3800 об/мин.
 Автоматическое время работы: 15 минут.
 Литиевая батарея 2000 мА/ч.
 Время зарядки 60 мин.
 Время работы: 60-90 мин.
 Комплектация: массажер –1 шт, сменные насадки – 6 шт, сетевой адаптер – 1шт, инструкция – 1 шт.



Служба заботы о клиентах

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.

Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel.
 Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059, www.bradex.co.il

Импортер на территории РФ:

ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru

Импортер на территории Республики Беларусь:

ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д. 9 комн. 34/4, УНП 192409754. Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by.

Страна происхождения: Китай

Изготовитель:

Джецзян Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед.
 Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708. Тел: +86-574-6560937,
 факс: +86-574-6560938, e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com

Международная торговая марка «BRADEX».

Per. №1419183
 Израиль - Per. №204012
 Россия - Per. №444287, №683532

Срок эксплуатации: 1 год.
 Гарантийный срок: 1 год.
 Дату производства смотрите на упаковке.



Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с инструкцией
 Храните в местах, недоступных для детей и животных




ВИДЕО О ТОВАРЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ

МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
 KZ 0306

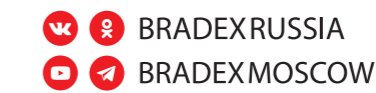

BRADEXRUSSIA

BRADEXMOSCOW



МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ избавит вас от усталости и поможет быстрому расслаблению мышц после активной физической нагрузки. Он работает в 6 разных режимах на трех разных скоростях: вы сможете легко подобрать подходящий режим для любого участка тела. Используйте массажер регулярно 2 раза в день по 5-15 минут для улучшения кровообращения, что будет способствовать выводу молочной кислоты, токсинов и продуктов распада белков. Кроме того массаж помогает восстановлению нервных импульсов в мышцах.

Массажер отлично подходит не только для спортсменов и людей, испытывающих сильные физические нагрузки, но и для решения проблем с целлюлитом. Во время массажа стимулируется кровоток, нормализуется обмен веществ, а также работа сальных и потовых желез. Ваша кожа начинает нормально дышать, улучшается ее внешний вид и Ваше настроение.

Эргономичная форма ручки массажера для тела BRADEX легко лежит в руке и имеет специальное противоскользящее покрытие. Беспроводной массажер для тела легко зарядить и удобно хранить благодаря специальной подставке, входящей в комплект.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Массируйте спину, руки, ноги, ягодицы, воротниковую зону, и плечи.
- В комплекте 6 сменных насадок для любого участка тела.
- 6 программ и 3 ступени интенсивности массажа.
- Автономно работает от перезаряжаемого аккумулятора.
- Эргономичный дизайн и удобная рукоятка.

- Специальная подставка для хранения массажера и насадок.
- Подходит для быстрого снятия гипертонуса мышц после активных физических нагрузок.
- Помогает победить целлюлит, улучшить кровоток и разрушить связи между жировыми клетками.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

Храните в местах, недоступных для детей и животных.
 Храните вдали от нагревательных приборов, прямых солнечных лучей, воды и других жидкостей.

СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ:

1. Массажер.
2. Сменные насадки.
3. Сетевой адаптер.
4. Панель управления с кнопками:
 - MODE – выбор режима массажа;
 - включение (выключение);
 - «+» – увеличение скорости массажа;
 - «-» – уменьшение скорости массажа.



Зарядный порт

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Перед первым использованием обязательно полностью зарядите массажер.
- Для полной зарядки аккумулятора вставьте адаптер в зарядный порт и подключите к сети питания.

- Массажер быстро заряжается и работает от аккумулятора. Вы можете использовать его в любое время и где угодно.
- Выберите массажную насадку и закрепите ее на массажёре. Насадки легко откручиваются.
- Нажмите на кнопку включения/выключения.
- С помощью кнопки «MODE» выберите комфортный режим массажа.
- Используйте кнопки «+» и «-» для увеличения или уменьшения скорости массажа.
- Для массажа на разных частях тела, применяйте сменные насадки. Массажная головка надевается на участок с резьбой. Закончив массаж, вы можете снять одну массажную насадку и надеть другую.
- Настраивайте устройство специально под ваши пожелания, чтобы получить отличный результат.
- Рекомендуемая продолжительность процедуры массажа от 5 до 15 минут. Продолжительность режима по умолчанию – 15 минут.
- В процессе зарядки устройство не работает.



1. U-ОБРАЗНАЯ НАСАДКА

Для деликатного восстановительного массажа запястий, лодыжек, локтей, шейного отдела.



2. УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАСАДКА С 3-МЯ МАССАЖНЫМИ ГОЛОВКАМИ

Для глубокого антицеллюлитного и тонизирующего массажа бедер, ягодиц, боков, рук, спины, плеч.



3. КРУГЛАЯ НАСАДКА

Для расслабляющего общего массажа различных частей тела: живота, шеи, плеч, спины.



5. ТОЧЕЧНАЯ НАСАДКА

Для разминающего массажа всего тела.



4. НАСАДКА ДЛЯ АКУПУНКТУРНОГО МАССАЖА ОТДЕЛЬНЫХ ЗОН

Для глубокого воздействия на точки в области ступней, шеи, спины.



6. ПАЛЬЧИКОВАЯ НАСАДКА

Воздействует на триггерные точки всего тела, улучшает кровообращение, сокращает болезненные ощущения в мышцах.