

Аппарат для ультразвуковой чистки, фонофореза и микромассажа лица с дополнительными насадками для брашинга.

Характеристики:

Материал: ABS, сталь, силикон.

Размер: 5,3 x 15,9 x 1,5 см.

Мощность: 3 Вт.

Входное напряжение: 5 В.

Частота ультразвуковых волн: 24,5 кГц.

Аккумулятор: 500 мАч.

Время зарядки: 90 мин.

Время работы: 40 мин.

Работает от аккумулятора.

Комплектация: ультразвуковой аппарат – 1 шт., защитный чехол для аппликатора – 1 шт., разъем питания USB – 1 шт., насадки – 2 шт., инструкция.

Дату производства смотреть на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год.

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.

Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel.

Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059.

www.bradex.co.il.

Импортер на территории РФ: ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 145, корп. 8.

Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66,

www.bradex.ru.

Импортер на территории Республики Беларусь: ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д. 9 комн. 34/4. УНП 192409754. Сайт: www.bradex.by.

E-mail: info@bradex.by. Страна происхождения: Китай.

Изготовитель: Джецзянь Нью Вижн Импорт энд Экспорт

Компани Лимитед. Адрес: Синьцзянь Роуд, 5,

Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР,

315708. Тел.: +86-574-6560937,

факс: +86-574-6560938.

E-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com.

Международная торговая марка «BRADEX».

Reg. №1419183. Израиль - Reg. №204012.

Россия - Reg. №444287, №683532



Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с инструкцией



Храните в местах, недоступных для детей и животных

BRADEX

Health & Beauty

АППАРАТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ С НАСАДКАМИ ДЛЯ БРАШИНГА

ИНСТРУКЦИЯ
KZ 0402



ВИДЕО О ТОВАРЕ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ **ЗДЕСЬ**



BRADEXRUSSIA



BRADEXMOSCOW

Аппарат для ультразвуковой чистки, фонофореза и микро-массажа лица с дополнительными насадками для брашинга – комплексный омолаживающий уход и глубокое очищение всех типов кожи в домашних условиях.

Многофункциональный прибор работает в 3 режимах (ультразвуковой пилинг, фонофорез, ультразвуковой микромассаж) и отлично сочетается с любыми уходовыми косметическими средствами: пенка, гель, эмульсия, массажный крем.

Брашинг – предварительная чистка лица с помощью силиконовых гипоаллергенных щеточек. Они надеваются на аппликатор, который вырабатывает высокочастотные колебания. Благодаря такому деликатному, не травматичному воздействию, с поверхности лица легко удаляются загрязнения, остатки декоративной косметики, излишки себума. Появляется приятное ощущение свежести и чистоты кожи.

Ультразвуковой пилинг – глубокое очищение и интенсивный уход, во время которого отшелушиваются ороговевшие клетки кожи, поры «освобождаются» от черных точек, нормализуются обменные процессы в тканях, выравнивается тон кожи.

Фонофорез усиливает омолаживающее действие косметики и доставляет ее активные ингредиенты глубоко в кожу с помощью ультразвука. Достигается пролонгированный эффект безинъекционной мезотерапии, так как молекулы косметического средства воздействуют на клетки эпидермиса и дермы изнутри.

Завершает уход гальванический лифтинг-массаж, питающий и омолаживающий кожу. Стимулируется выработка коллагена, эластина, постепенно выравниваются рубцы, постакне, осветляются пигментные пятна, активизируется кровообращение и лимфоотток.

В результате, морщины разглаживаются, овал лица подтягивается, а кожа становится сияющей, гладкой и упругой.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- 3 режима: глубокое очищение, фонофорез, микро-массаж
- Ежедневный профессиональный уход за кожей
- Комфортная, безболезненная процедура
- Компактный, мобильный формат
- Беспроводное использование

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

Если зарядное устройство повреждено, его необходимо заменить или обратиться в сервисный центр.

Если вы чувствуете боль или непривычные ощущения на лице, теле, немедленно прекратите использование прибора.

Выключите аппарат и зарядное устройство от питания перед очисткой и хранением.

Не пользуйтесь прибором вблизи легковоспламеняющихся веществ (алкоголь, бензин, жидкость для снятия лака, различные спреи и пр.).

Если аппарат поврежден в результате падения, не включайте его повторно.

Пожалуйста, не разбирайте прибор самостоятельно. Обратитесь в сервисный центр магазина, в котором покупали данное устройство.

Используйте оригинальный заводской USB-кабель для зарядки устройства от электросети.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Заболевания крови, тромбофлебиты, аритмия, врожденный порок сердца, перенесенные пластические операции, постоперационный период, проведенная лазерная шлифовка кожи, химический пилинг, нарушение целостности кожи в области применения,

болезни кожи, заболевания лицевого нерва, аллергические реакции, чувствительность к теплу, гнойные воспаления, повышенная чувствительность кожи, беременность, лактация, менструация, психические расстройства. Устройство запрещено к применению лицам, употребляющим алкоголь, наркотики, а также находящимся в состоянии чрезмерной усталости или при слабом, болезненном состоянии организма.

Этот прибор не предназначен для людей с ограниченными физическими возможностями, замедленной реакцией или умственной отсталостью. Безопасное применение аппарата данными лицами возможно лишь в том случае, если он используется ими под руководством или с помощью персонала, ответственного за безопасность. Запрещено использовать прибор, играть с ним детям без присмотра взрослых, а также инвалидам.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

Товар не является медицинским изделием.

ОПИСАНИЕ:

- Ультразвуковой аппарат
- Защитный чехол для аппликатора
- Разъем питания USB
- 2 насадки




ПРИМЕНЕНИЕ:

Режим брашинга и ультразвукового пилинга (глубокое очищение с использованием специальных мягких насадок-щеточек)

1. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку питания до включения устройства. Затем 3 раза нажмите на кнопку выбора режима и выберите режим «Очищение».
2. Нанесите очищающее средство на лицо.
3. С помощью аппликатора и дополнительных насадок для брашинга очистите лицо.

Режим фонофореза (глубокое питание кожи с использованием активной косметики: эфирного масла, эмульсии, крема)

1. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку питания до включения устройства. Затем 2 раза нажмите на кнопку выбора режима и выберите режим «Увлажнение и питание».
2. Нанесите косметическое средство на лицо.
3. Как показано на схеме, проводите аппликатором по лицу.

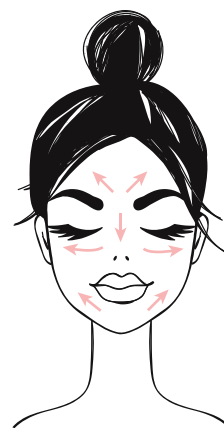



Режим ультразвукового микромассажа (импульсный режим с использованием массажных косметических средств)

1. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку питания до включения устройства. Затем непосредственно переходите к режиму «Лифтинг-массаж».
2. Нанесите массажное косметическое средство на лицо.
3. Как показано на схеме, массажными движениями проводите аппликатором по лицу.

дите аппликатором по лицу.

ХРАНЕНИЕ И УХОД:

- Избегайте сырости. Не оставляйте устройство в душе и ванной комнате. Храните прибор в прохладном сухом месте.
- Храните аппарат в недоступных для детей местах.

СПОСОБЫ ОЧИСТКИ:

- Очищайте аппарат сразу после использования, чтобы избежать накопления жира или других загрязнений. Протирайте ватным диском или мягкой тканью.
- Не используйте резкие или едкие очистители, растворители и другие продукты бытовой химии для очистки ультразвукового аппликатора во избежание его повреждений.
- Не мойте аппликатор непосредственно в воде, так как это может повредить аппарат.


ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

РЕЗУЛЬТАТЫ:



ГЛУБОКОЕ
ОЧИЩЕНИЕ
КОЖИ

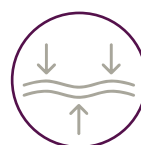

КОЖА
УПРУГАЯ И
ЭЛАСТИЧНАЯ



УМЕНЬШЕНИЕ
ОТЕЧНОСТИ



СОКРАЩЕНИЕ
МОРЩИН



ПОВЫШЕНИЕ
УВЛАЖНЕННОСТИ
КОЖИ



УЛУЧШЕНИЕ
ЦВЕТА ЛИЦА



УМЕНЬШЕНИЕ
РУБЦОВ И
ШРАМОВ



УСТРАНЕНИЕ
СТРЕССА



КОРРЕКЦИЯ
САМОТЕДЕЛЕНИЯ
СУЖЕНИЕ ПОР