

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ:

- Если прибор не используется, то необходимо всегда отключать его от электросети.
- Не допускайте попадания воды и иных жидкостей в устройство, чтобы избежать повреждений массажера.
- Запрещено поднимать прибор за шнур, а также тянуть за шнур, чтобы вытащить вилку из розетки.
- Не допускайте передавливания шнура тяжелыми предметами.
- Гарантия действует при условии соблюдения инструкции и правильной эксплуатации прибора.

СПОСОБЫ ОЧИСТКИ:

- Перед очищением прибора всегда выключайте его из электросети.
- Пользуйтесь мягкой тканью, смоченной нейтральным моющим средством.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.
Trans East Metal Ltd, P.O.B 9101, Haifa 31091, Israel. Tel: +972-4-8521824,
fax: +972-3-7256059, www.bradex.co.il
Импортер на территории РФ: ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 145, корп. 8.
8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru
Импортер на территории Республики Беларусь: ООО «БРАДЕК»,
220019, г. Минск, ул. Монтажников, д. 9 комн. 34. УПН 192409754.
Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by
Страна происхождения: Китай
Изготовитель: Джекян Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани

BRADEX
Health & Beauty

 Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с инструкцией
 Храните в местах, недоступных для детей и животных



МАССАЖНАЯ ПОДУШКА ШЕЯ, ПЛЕЧИ, СПИНА





ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
KZ 0473





Ощущаете дискомфорт в области спины, шеи и плеч? Мышцы «ноят» от сидячей работы, малоподвижного образа жизни, физических нагрузок?

Массажная подушка «ШЕЯ, ПЛЕЧИ, СПИНА» быстро снимет напряжение и приведет вас в тонус. В машине, дома, на даче, в офисе – он будет всегда у вас под рукой!

Портативный роликовый массажер легко помещается в сумку или рюкзак. Работает от розетки или прикуривателя.

ПРЕИМУЩЕСТВА:


- Скорая помощь для вашей шеи, спины и плеч в любое время.
- 4 массажных ролика для имитации ручного массажа.
- 3 режима работы: массаж в двух направлениях с прогревом и без.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

Храните в местах, недоступных для детей и животных.
Храните вдали от нагревательных приборов, воды и других жидкостей.

СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ:

1. Корпус подушки.
2. Чехол на молнии.
3. 4 массажных ролика.
4. Адаптер для сети 220В.
5. Адаптер для работы от автомобильного прикуривателя.
6. Разъем для подключения адаптера.
7. Широкая резинка для фиксации на спинке стула или кресла.
8. Кнопка «ON/OFF».
- 8.1. Вращение роликов внутрь, прогрев.
- 8.2. Вращение роликов наружу, прогрев.
- 8.3. Вращение наружу, без прогрева.
- 8.4. Выключение.

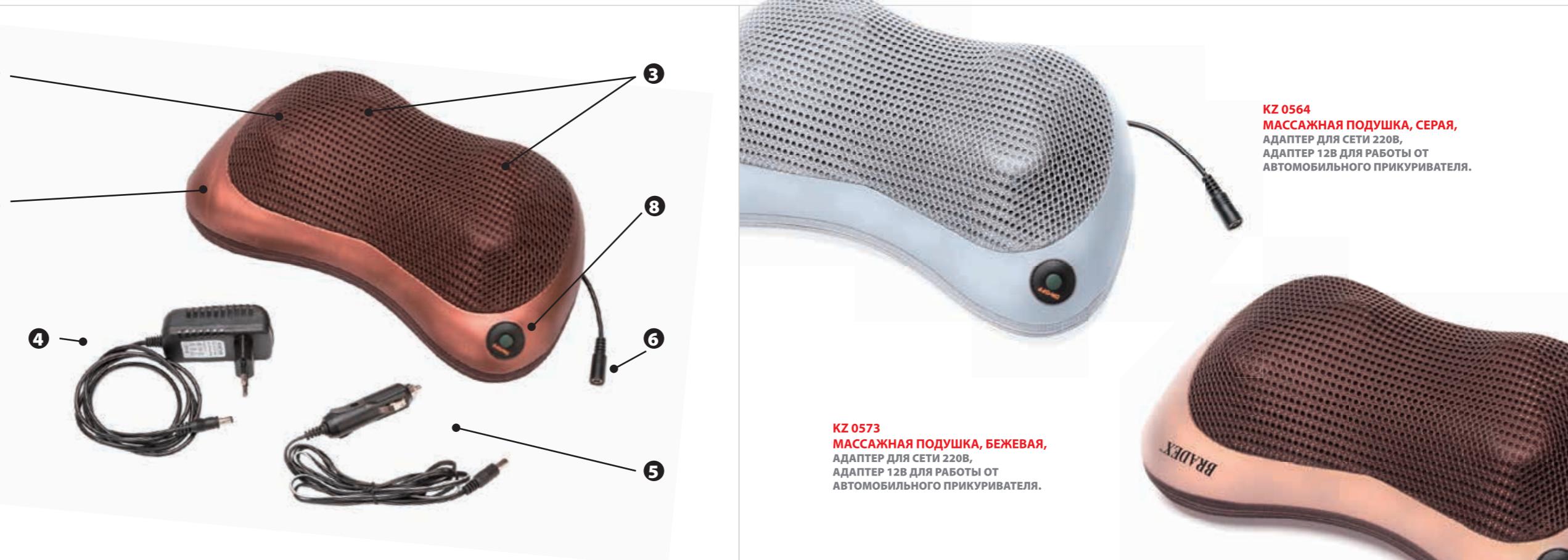

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Вставьте адаптер питания (для розетки или прикуривателя) в разъем для провода на массажере.
- Подключите адаптер к розетке или к прикуривателю.
- Положите массажер под шею или закрепите за резинку на спинке стула или кресла.
- Можно также использовать на плечах, бедрах, ягодицах, пояснице или спине.
- Нажмите кнопку «ON/OFF», удерживая ее в течение 5 секунд. Массажные ролики начнут вращаться внутрь, функция прогрева включена.
- Нажмите кнопку «ON/OFF» еще раз – массажные ролики начнут вращаться наружу, функция прогрева включена.
- Нажмите кнопки «ON/OFF» в раз отключает функцию прогрева, ролики продолжат вращаться наружу.
- Длительность процедуры массажа – 15 минут. Не используйте больше 30 минут за один раз.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

- Каждый раз после использования отключайте массажер от сети.
- Не оставляйте прибор включенным без присмотра.
- Во избежание возможного возгорания не накрывайте массажер.
- Не позволяйте детям использовать прибор самостоятельно.
- Не эксплуатируйте поврежденный или неисправный массажер.
- Не тяните за шнур питания и не используйте в качестве ручки.
- Держите шнур вдали от нагревательных приборов и высоких температур.
- Не используйте при температуре выше 40°C.
- Не используйте массажер в воде или при высокой влажности.
- Если на массажер попала вода, немедленно прекратите использование и отключите от питания.
- Не разбирайте массажер самостоятельно, не трогайте внутренние детали.
- Не используйте в состоянии алкогольного опьянения и во время сна.
- Не используйте во время вождения автомобиля.
- Не используйте при появлении неприятного запаха.
- Не используйте непосредственно на локтях, коленях, животе и груди.
- Не берите массажер мокрыми руками.