

#### ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

#### УТИЛИЗАЦИЯ:


Данное изделие следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.

#### ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:


Возможная неисправность	Возможная причина	Метод устранения
Устройство не работает	возможно разряжен аккумулятор	зарядите аккумулятор

#### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Не использовать на коже с папилломами, бородавками, родинками, акне, ожогами и повреждениями кожи. Беременность, заболевания крови, острые инфекционные заболевания, истощение, заболевания сердца, новообразования.

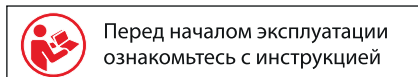

Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с инструкцией

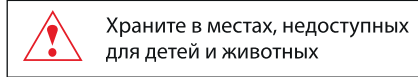

Храните в местах, недоступных для детей и животных



Служба заботы о клиентах

04

Материал: терилен, спандекс, полиуретан, ABS-пластик, металл.

Материал чехла: 95% терилен + 5% спандекс.

Материал наполнителя: вспененный полиуретан.

Цвет:

KZ 0558 – серо-зелёная

KZ 0559 – серо-розовая

Размер/объем: 255x250x125 мм.

Мощность литиевого аккумулятора: 2000 mAh.

Время зарядки: 3 ч. Время работы: 80 мин.

Мощность: 3,7 Вт.

Напряжение входное: 220 В. Напряжение выходное: 5 В.

Тип прогрева: инфракрасный. Температура прогрева: 42°C.

Комплектация: массажная подушка – 1 шт., зарядный шнур – 1 шт., адаптер для зарядки – 1 шт., инструкция - 1 шт.

Дату производства смотрите на упаковке.

Срок эксплуатации: 3 года.

Гарантийный срок: 1 год.

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.

Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel. Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059. www.bradex.co.il.

Импортер на территории РФ: ООО «Технологии здоровья».

Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru.

Импортер на территории Республики Беларусь: ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д. 9 комн. 34/4. УНП 192409754. Сайт: www.bradex.by.

E-mail: info@bradex.by

Страна происхождения: Китай. Изготовитель: Джецзян Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед.

Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Байтанг, город Нинбо, КНР. тел:+86-574-6560937,

факс:+86-574-6560938. e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com.

Международная торговая марка «BRADEX».

Reg. №1419183.

Израиль - Рег. №204012.

Россия - Рег. №444287, №683532



05



ВИДЕО О ТОВАРЕ  
ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ

## ДОРОЖНАЯ МАССАЖНАЯ ПОДУШКА ДЛЯ ШЕИ С ЗАВЯЗКАМИ

**BRADEX**  
Health & Beauty

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KZ 0559

KZ 0558



BRADEXRUSSIA  
 BRADEXMOSCOW

Дорожная массажная подушка для шеи с завязками – отличное средство для фиксации физиологичного положения шейных позвонков, снятия усталости и предотвращения болевых ощущений при долгих поездках. Подушка-подголовник фиксируется на шее завязками, что позволяет вам комфортно расслабиться и отдохнуть в дороге. Благодаря “интеллектуальному” наполнителю подголовник поддерживает естественное положение шеи, имеет “эффект памяти” – запоминает и держит форму. Основное преимущество подушки – это возможность получить полноценный сеанс массажа в любое время: в нее встроены 2 ролика, которые хорошо разминают мышцы и улучшают кровообращение.

Время одного сеанса массажа – 10 минут, после этого таймер отключается автоматически, для нового сеанса необходимо вновь нажать на пуск. Также подушка оснащена функциями прогрева и вибрации для еще большего массажного эффекта.

Использование подушки-подголовника особенно рекомендуется для снятия усталости и улучшения общего состояния после интенсивных физических нагрузок или при сидячем образе жизни.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- 3 режима массажа.
- 2 режима интенсивности вращения роликов.
- 2 встроенных ролика для глубокого массажа шеи и воротниковой зоны.
- Функция инфракрасного прогрева с возможностью отключения.
- Функция вибрации.
- Возможность зарядки от USB и от сети.

#### ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

Храните в местах, недоступных для детей и животных.

Храните вдали от нагревательных приборов.

Храните в сухом прохладном месте.

01

#### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Не использовать при контакте с водой.

Не погружайте подушку и зарядное устройство в воду.

Избегать попадания воды и других жидкостей внутрь.

Не позволяйте детям пользоваться подушкой без присмотра взрослых.

Запрещается использовать массажер без предварительного ознакомления с инструкцией.

Не оставляйте без внимания подушку, включенную в сеть.

Никогда не тяните за шнур при отключении прибора от сети.

Не допускайте соприкосновения шнура или самой подушки с нагретыми поверхностями.

Не пользуйтесь массажером с поврежденным шнуром.

Не пытайтесь отремонтировать подушку самостоятельно.

#### ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА:

- Подушка
- 2 встроенных ролика
- Чехол с завязками
- Панель управления
- Аккумулятор
- Usb-разъем

#### КНОПКИ:

- Пуск
- Режимы массажа
- Режимы интенсивности вращения роликов

#### УХОД ЗА ЧЕХЛОМ:

Перед стиркой необходимо снять чехол с подушки.

Допустима только ручная стирка.

Не гладить.

Не отбеливать.



02

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

При запуске удерживайте кнопку ПУСК более 3 сек. Длительное нажатие на кнопку предусмотрено для предотвращения нежелательного включения.

Три режима массажа - для выбора режима массажа нажмите на кнопку **M**:

1) только массаж роликами+прогрев (на данном режиме существует возможность отключения прогрева при помощи однократного нажатия на кнопку **M**).

2) только вибрация+прогрев.

3) массаж роликами и вибрация + прогрев.

Так же устройство предполагает обычный прогрев без осуществления массажа (включается нажатием на кнопку **M** - режим следующий за режимом массажа «вибрация+прогрев»).

С помощью кнопки осуществляется выбор интенсивности массажа роликами:

– обычный режим;

– интенсивный массаж.

Для прекращения использования удерживайте кнопку ПУСК 3 секунды.

Подушка работает от аккумулятора, заряжайте его вовремя.

Зарядка занимает 2 часа.

При полной зарядке отключите зарядное устройство от сети.

03