

УХОД:

При загрязнении пистолета или насадок протереть влажной салфеткой.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Данное изделие следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:		
Возможная неисправность	Возможная причина	Метод устранения
Устройство не работает	Возможно, разряжен аккумулятор	Зарядите аккумулятор

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Не использовать на коже с папилломами, бородавками, родинками, акне, ожогами и повреждениями кожи. Беременность, заболевания крови, острые инфекционные заболевания, истощение, заболевания сердца, новообразования.

04

KZ 0561

Характеристики:

Материал: алюминий, ABS, TPR ручка.

Цвет: чёрный, голубой

Работает от сети: 110-240 В

Частота тока: 50/60 Гц

Напряжение: 12,5 В, 2550 мАч

Тип аккумулятора: литий-ионный.

Время работы при полной зарядке: 3 часа.

Время полной зарядки: 3-3,5 часа.

6 уровней скорости.

Скорость: 1200-3200 об / мин.

Мотор: щеточный.

Комплектация: массажер – 1 шт., насадки – 5 шт., адаптер (зарядное устройство – 1 шт., инструкция - 1 шт.

Дату производства смотреть на упаковке

Срок эксплуатации: 3 года.

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.

Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel. Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059. www.bradex.co.il.

Импортер на территории РФ: ООО «Технологии здоровья».

Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru.

Импортер на территории Республики Беларусь: ООО «BRADEX», 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д. 9 комн. 34/4, УНП 192409754.

Сайт: www.bradex.by, E-mail: info@bradex.by

Страна происхождения: Китай. Производитель: Джецзянь Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед.

Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708. тел:+86-574-6560937,

факс:+86-574-6560938. e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com.

Международная торговая марка «BRADEX».

Reg. №1419183.

Израиль - Рег. №204012.

Россия - Рег. №444287, №683532

BRADEX™
Health & Beauty

Перед началом эксплуатации
ознакомьтесь с инструкцией


Храните в местах, недоступных
для детей и животных

EAC

05

МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА «МАССАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

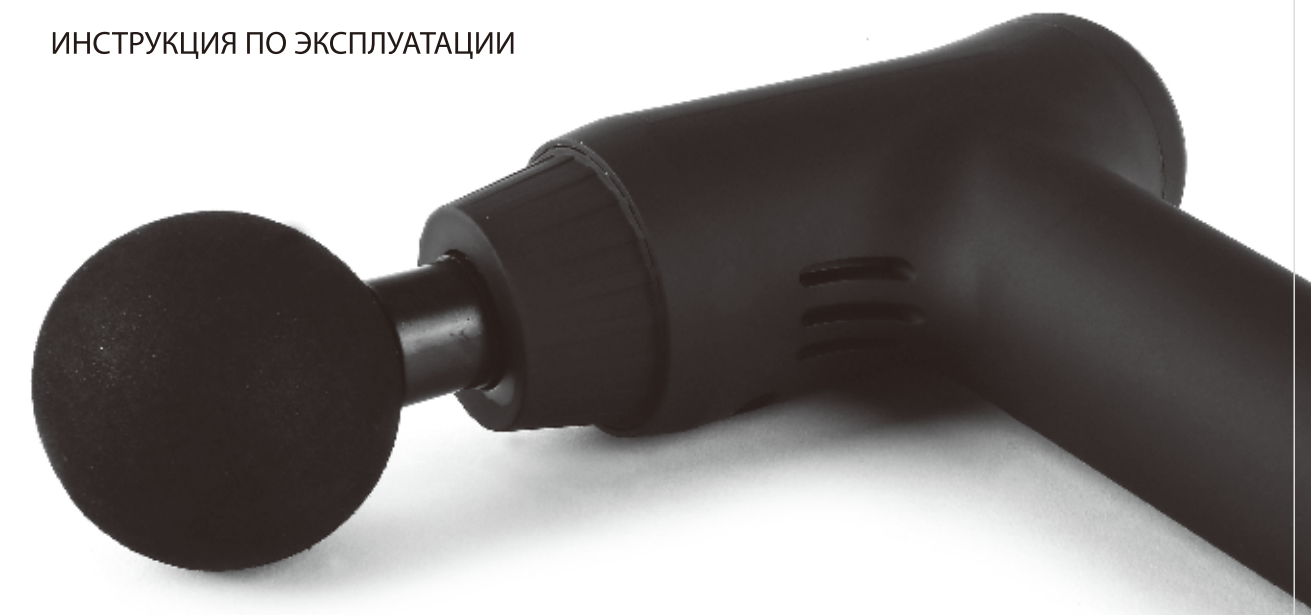

BRADEX™
Health & Beauty

Массажный пистолет – это массажер, основанный на методе вибрационной терапии, которая позволяет облегчить мышечную боль, расслабить все тело и сократить время восстановления мышц после нагрузки. Разработан также для снятия усталости, массажа триггерных точек, улучшения циркуляции крови и работы опорно-двигательного аппарата.

Может быть рекомендован спортсменам или людям, ведущим малоподвижный образ жизни, а также подверженным тяжелым физическим нагрузкам. Удобен в использовании: благодаря форме пистолета и противоскользящему покрытию удобно сидит в руке. Оснащен сменными насадками для разных групп мышц: спины, ног, рук, ягодиц, лодыжек и т.д. За 15 минутный сеанс массажа вы сможете снять мышечное напряжение и улучшить кровоток.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- 5 сменных насадок в комплекте
- Быстро снимает мышечное напряжение
- Идеально подходит для расслабления мышц после тренировки
- Эффективно борется с целлюлитом

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Не использовать при контакте с водой.

Не погружайте массажер и зарядное устройство в воду.

Избегать попадания воды и других жидкостей внутрь.

Не позволяйте детям пользоваться массажером без присмотра взрослых.

Запрещается использовать массажер без предварительного ознакомления с инструкцией.

Не оставляйте включенный в сеть массажер без внимания.

Никогда не тяните за шнур при отключении прибора от сети.

Не допускайте соприкосновения шнура или массажера с нагретыми поверхностями.

Не пользуйтесь массажером с поврежденным шнуром.

Не пытайтесь отремонтировать массажер самостоятельно.

01

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА:

1. Тумблер включения/выключения
2. Порт для зарядки
3. Регулятор скорости
4. Увеличение скорости
5. Уменьшение скорости
6. Индикатор заряда аккумулятора
6. Уровень интенсивности массажа

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

Храните в местах, недоступных для детей и животных.

Храните вдали от нагревательных приборов.

Храните в сухом прохладном месте.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Необходимо зарядить устройство перед использованием.

Используйте только оригинальное зарядное устройство.

Убедитесь, что массажер выключен во время подзарядки.

Включение: передвинуть тумблер в режим "On" - для


включения, в режим "Off" - для выключения. Регулировка

интенсивности массажа осуществляется кнопками "+" и "-".

При включенном массажере индикатор отображает

уровень заряда аккумулятора в % . Меняйте насадки при

выключенном массажере.

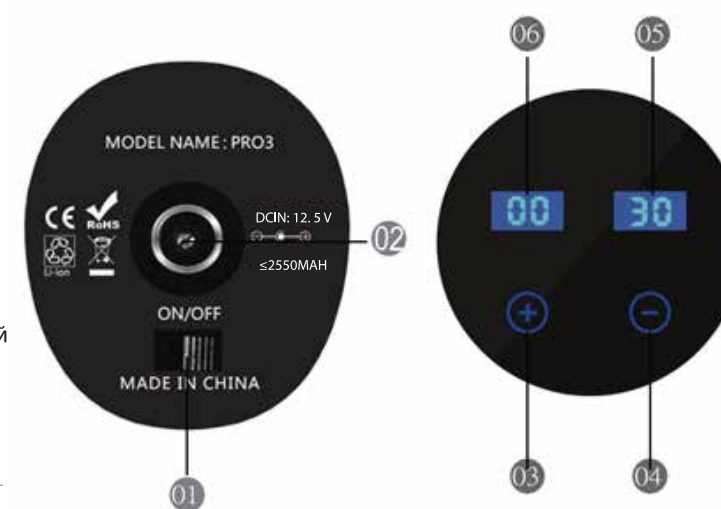

Уровень интенсивности массажа:

- 1) 1500 оборотов/минуту
- 2) 1900 оборотов/минуту
- 3) 2300 оборотов/минуту
- 4) 2700 оборотов/минуту
- 5) 3100 оборотов/минуту
- 6) 3500 оборотов/минуту



Круглая насадка

универсальная, подходит для массажа больших групп мышц, таких как мышцы спины, шеи и т.д.



Большая полукруглая насадка

для задней поверхности шеи, рук или мышц бедра, эффективна для борьбы с целлюлитом.



Насадка в форме Y

для всех групп мышц и более глубокой проработки мышц вдоль позвоночника



Плоская насадка

для релаксации мышц



Конусообразная массажная насадка

для массажа вокруг суставов, глубоких тканей, триггерных точек, массажа стоп

03