

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: ПУ, АБС пластик, полиэстер, металл.
Цвет: бирюзовый, черный. Размер: массажная часть – 30 x 17 см., длина накидки – 121 см.
Входное напряжение: АС 100-240 В, 50 Гц.
Выходное напряжение: DC 12 В, 2А.
Мощность: 24 Вт. Инфракрасный прогрев. Прогрев: 40°C.
Максимальная нагрузка: 70-80 кг. Работает от сети 220 В или от автомобильного прикуривателя.
Комплектация: массажер – 1 шт., адаптер для сети 220 В – 1 шт., адаптер для работы от автомобильного прикуривателя – 1 шт., сумка – 1 шт., инструкция – 1 шт.

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.

Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel. Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059. www.bradex.co.il

Импортер на территории РФ: ООО «Технологии здоровья»,

Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru

Импортер на территории Республики Беларусь: ООО «БРАДЕХ»,

220019, г. Минск, ул. Монтажинов, д. 9 комн. 34/4. УНП 192409754. Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by

Страна происхождения: Китай.

Изготовитель: Джецзян Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани

Лимитед. Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Байтанг, город Нинбо, КНР, 315708. Тел: +86-574-6560937, факс: +86-574-6560938. e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com

Международная торговая марка «BRADEX».

Per.№1419183 Израиль - Per. №204012 Россия - Per. №444287, №683532

BRADEX
Health & Beauty



Гарантийный срок: 1 год.

Срок эксплуатации: 1 год.

Дату производства смотреть на упаковке.

Возможная неисправность	Возможная причина	Метод устранения
Устройство не работает	Вилка не плотно подключена к розетке	Вставьте вилку правильно
Массажер слишком горячий	Слишком долгое применение массажера	Отключите массажер на 30 минут



KZ 0556
МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА
«БЛАЖЕНСТВО»

KZ 0568
ВИБРОМАССАЖЁР ДЛЯ ТЕЛА
БЕСПРОВОДНОЙ
С ФУНКЦИЕЙ ТАЙ ЧИ
И ШИАЦУ МАССАЖА

KZ 0561
МАССАЖЕР ВИБРАЦИОННЫЙ ДЛЯ ТЕЛА
«МАССАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ»



KZ 0571
МАССАЖНАЯ НАКИДКА
С ПОДГРЕВОМ

KZ 0567
МАССАЖЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
БЕСПРОВОДНОЙ
С ДИСПЛЕЕМ
И 7 СМЕННЫМИ НАСАДКАМИ

KZ 0570
МАССАЖЁР ДЛЯ НОГ
С ФУНКЦИЕЙ МАССАЖА
ГУША ASIA SPA

МАССАЖЕР ДЛЯ ШЕИ И ПЛЕЧ ШИАЦУ С СУМКОЙ

BRADEX
Health & Beauty

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KZ 0566

BRADEXRUSSIA
 BRADEXMOSCOW



Массажер для шеи и плеч «ШИАЦУ» подойдет для расслабляющего массажа мышц шеи, спины, рук и ног, а также для коррекции проблемных зон. Универсальный массажер «ШИАЦУ» позволит устранить зажатость мышц и болевые синдромы, превращая каждый сеанс массажа в настоящее удовольствие.

Шестнадцать массажных роликов имитируют ручной массаж, меняя направление движения в двух режимах и глубоко разминают мышцы, восстанавливая нарушенное кровоснабжение тканей и органов. Дополнительная функция инфракрасного прогревания повышает эффективность массажа, обеспечивая глубокое расслабление после насыщенного дня.

Эргономичная форма массажера подойдет для разминающего массажа поясницы, что также положительно отразится на работе желудочно-кишечного тракта и органах малого таза.

Массажная накидка способна помочь расслабиться, снять мышечное напряжение и спазмы в нижних конечностях, а массаж в области бедер поможет справиться с целлюлитом, нормализовать питание тканей и ускорить расщепление подкожных жиров.

Наличие дополнительной зарядки от прикуривателя позволит легко и просто воспользоваться массажной универсальной накидкой в автомобиле и сделать Ваше путешествие комфортным и приятным.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- 16 массажных роликов и 2 режима движения
- 3 уровня интенсивности массажа
- Эргономичная форма массажера подходит для массажа всего тела
- Инфракрасное прогревание повышает эффективность массажа
- Дополнительная зарядка от прикуривателя – удобно использовать в автомобиле.
- В комплект входит сумка для удобной транспортировки и хранения массажера.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Диабет, флебит, тромбоз, новообразования, воспалительные процессы, эпилепсия, беременность, остеопороз, воспаления, травмы, сердечные заболевания, гипертония, опухолевые процессы, мочекаменная болезнь, клапаны в сердце.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

Товар не является медицинским изделием.

Разработан для расслабляющего массажа.


Не использовать при ожогах и других поражениях кожи.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

- Храните в местах, недоступных для детей и животных.
- Храните вдали от нагревательных приборов.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Каждый раз после использования отключайте массажер от сети.
- Не оставляйте прибор включенным без присмотра.
- Во избежание возможного возгорания не накрывайте массажер.
- Не позволяйте детям использовать прибор самостоятельно.
- Не эксплуатируйте поврежденный или неисправный массажер.
- Не тяните за шнур.
- Держите шнур вдали от нагревательных приборов и высоких температур.
- Не используйте массажер в воде или при высокой влажности.
- Если массажер упал в воду, не трогайте его руками и сразу отключите от розетки.
- Если на массажер попала вода или другая жидкость, немедленно прекратите использование и отключите от розетки.
- Не используйте в ванной комнате.
- Не вставляйте вилку шнура в розетку мокрыми руками.
- Не разбирайте массажер самостоятельно, не трогайте внутренние детали.
- Не стойте, не сидите на массажере, не давите сильно на массажные ролики.
- Перед использованием убедитесь, что напряжение источника питания соответствует требованиям.
- Будьте аккуратны при использовании прогрева.
- Длительное использование и перегрев массажера может сократить срок службы прибора.
- При перегреве отключите массажер и дайте ему остыть.

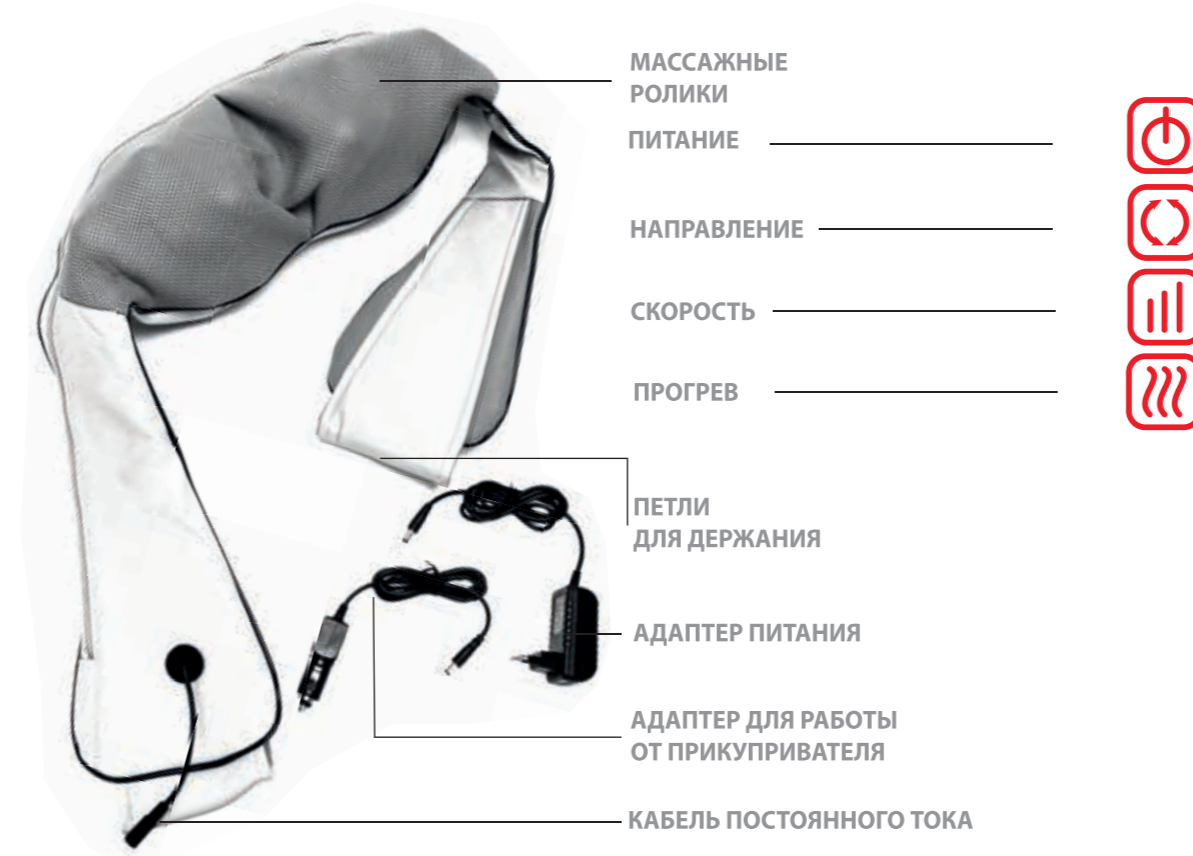

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Вставьте адаптер питания (для розетки или прикуривателя) в разъем для провода на массажере.
- Подключите адаптер к розетке или к прикуривателю.
- Положите массажер на плечи, а руки – в рукавчики или просто придерживайте края накидки руками.
- Также можно расположить массажер на шее, плечах, бедрах, ягодицах, пояснице, животе или спине.
- Нажмите кнопку «включение». Массажные ролики начнут вращаться.
- Для изменения направления вращения роликов нажмите соответствующую кнопку.
- Ролики вращаются внутрь или наружу.
- Для прогрева нажмите соответствующую кнопку. Для отмены прогрева нажмите кнопку еще раз.
- Длительность процедуры массажа – 15 минут. Для продления процедуры нажмите кнопку «включение» еще раз.
- Не используйте больше 30 минут за один сеанс.

ХРАНЕНИЕ И УХОД:

Храните массажер в коробке в сухом прохладном месте. Избегайте контакта с острыми предметами. Не наматывайте провод на массажер, чтобы избежать повреждений. Не подвешивайте и не тяните массажер за шнур.

СПОСОБЫ ОЧИСТКИ ПРИБОРА:


При загрязнении отключите прибор из сети, дайте остыть, протрите слегка влажной тряпкой, просушите. Не используйте абразивные, отбеливающие и другие агрессивные моющие средства.

ТРАНСПОРТИРОВКА:


Допускается в производственной упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Данное изделие следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.

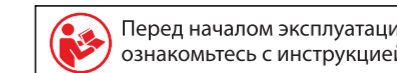

Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с инструкцией

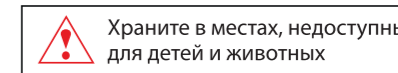

Храните в местах, недоступных для детей и животных



Служба заботы о клиентах