

Дату производства смотрите на упаковке.
Срок эксплуатации: 1 год.
Гарантийный срок: 1 год.

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.
Tzani Eyal Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel.
Tel: +972-4-8521024. Fax: +972-3-7256059
www.bradex.co.il

Страна происхождения: Китай

Импортеры:
Девелоп Нью Вижн Импорт энд Экспорт Компани Лимитед.
Адрес: Синайский Роуд, 5, Индустриальная зона Байтан, город Нимбо,
КНР, 315708. тел:+86-574-6560937, факс:+86-574-6560938
e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com

Импортер на территории РФ: ООО "Технологии здоровья", Российская Федерация, 117408, Москва, ул. Варшавская, д.145, корп. 8,
Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-24-66, www.bradex.ru


Импортер на территории Республики Беларусь: ООО «BRADEX»,
220019, г. Минск, ул. Монтанжика, д. 9 комн. 34/4, УНП
192409754. Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by.

Международная торговая марка «BRADEX». Рег.№ 1419183

Израиль - Рег. № 204012

Россия - Рег. № 444287, № 683532

Дарсонваль импульсный массажер для лица, тела и волос с 4 насадками с Аргонем, белый

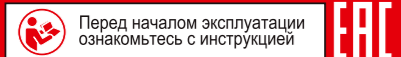


Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с инструкцией



Храните в местах, недоступных для детей и животных



ДАРСОНВАЛЬ ИМПУЛЬСНЫЙ МАССАЖЕР для лица, тела и волос с 4 насадками с аргонем ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

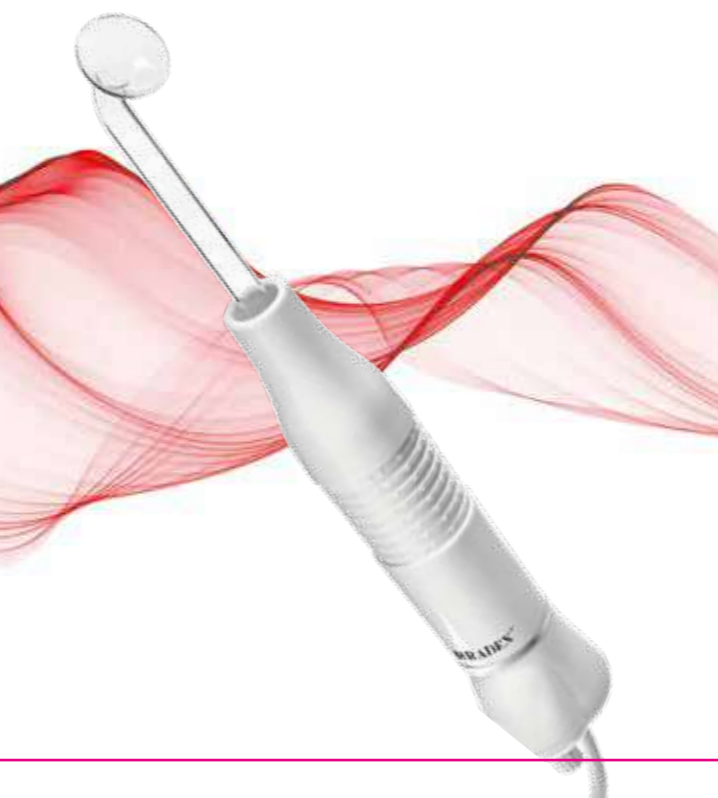

ПРОФИЛАКТИКА НЕВРОЗОВ, РАСТРОЙСТВ СНА
Данная процедура должна быть назначена и проведена только при согласовании с лечащим врачом.
Техника выполнения: Процедура выполняется плавными движениями от области затылка по задней поверхности шеи к плечам с использованием насадка-электрод эллиптической формы и контактным воздействием на низкую интенсивности в течение 5-10 минут. Рекомендуется проводить процедуру ежедневно или через день. Курс составляет от 10 до 15 процедур.



ПРОФИЛАКТИКА НЕВРАЛГИИ
Для безопасного и эффективного воздействия на болевые зоны, такие как невралгии, невриты и радикулит, рекомендуется предварительная консультация с врачом.

Техника выполнения: Для выполнения процедуры используется насадка-электрод эллиптической формы, которая обеспечивает бесконтактное использование и среднюю интенсивность воздействия в течение 10 минут. Для лечения остеохондроза позвоночника применяется контактная методика в лобильном режиме. Электрод перемещается справа и слева вдоль позвоночника от крестца до шеи. Длительность воздействия - 6-8 минут, общее количество процедур - 10-15.



ГОЛОВНЫЕ БОЛИ
Для лечения головных болей, связанных с такими заболеваниями, как вегетососудистая дистония и мигрени, применяется контактная методика в лобильном режиме. Перед началом процедуры необходимо удалить из волос заколки и другие металлические предметы, а также расчесать волосы. Во время процедуры электрод медленно перемещается от лба к затылку, постепенно усиливая интенсивность воздействия, пока не появится ощущение слабого покалывания. Длительность воздействия составляет 7-10 минут, проводится ежедневно или через день, общее количество процедур - 20-25.



МАССАЖ РУК
Процедура ручного массажа проводится с использованием электрода "грибок" по контактной методике. Без воздушного зорора, средней интенсивности. Массаж выполняется плавными круговыми движениями по спирали от пальцев до области плеча.



МАССАЖ ВОРОТНИКОВОЙ ЗОНЫ И ШЕИ
Для достижения эффекта приятного тепла во время процедуры используется электрод "грибок" в режиме "тихого зорора" с низкой интенсивностью. Массажные движения направлены от области затылка по задней поверхности шеи к плечам. Рекомендуется проводить процедуру ежедневно или через день, с продолжительностью воздействия 5-10 минут. Курс составляет 10-15 процедур.



ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Для терапии заболеваний глотки, гортани, миндалин (фарингит, тонзиллит, ангина, ларингит) используется контактная методика лобильном режиме. Электрод перемещается по передней поверхности от области затылка по задней поверхности шеи к плечам с использованием насадка-электрод эллиптической формы и контактным воздействием на низкую интенсивности в течение 5-10 минут. Курс: 10 процедур.
Для профилактики и лечения бронхита и трахеита используется контактная методика в лобильном режиме. Процедура начинается с обработки области носа: электрод перемещается от передней поверхности носа к области затылка по задней поверхности шеи к плечам с использованием насадка-электрод эллиптической формы и контактным воздействием на низкую интенсивности в течение 3-5 минут. Далее проводится обработка шеи, где электрод перемещается линейными движениями вниз и вверх в течение 5 минут на передней поверхности и задней поверхности. Рекомендуется пройти курс из 8-10 процедур.
Для терапии заболеваний носа и придаточных пазух (ринит, фронтит, гайморит, катар) используется контактная методика в лобильном режиме. Проводится обработка участков кожи, расположенных непосредственно над патологическими очагами. Времени воздействия: 10-15 минут. Курс: 10 процедур.

ЛЕЧЕНИЕ ОРГАНОВ ЖКТ

Для профилактики и лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта эффективно применяется контактная методика в лобильном режиме. При хроническом гастрите рекомендуется проводить терапию в области желудка, перемещая электрод продольными и круговыми движениями по коже в эпигастриальной области. Продолжительность процедуры составляет 7-10 минут, которые рекомендуется проводить ежедневно или через день. Курс лечения включает 15-20 процедур.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Для терапии стоматитов используется контактная методика в лобильном режиме. Электрод перемещается круговыми движениями по язычку. Процедура проводится при низкой интенсивности. Времени воздействия: 5 минут. Курс: 10 процедур.
Для терапии пародонтоза, гингивитов используется контактная методика в лобильном режиме. Электрод медленно передвигают вдоль десен, не касаясь зубов. Процедура проводится при низкой или средней интенсивности. Времени воздействия: 5 минут на каждую челюсть. Курс: 10 процедур.



ЛЕЧЕНИЕ ОРГАНОВ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Для лечения микродистрофии рекомендуется использовать воздействие средней интенсивности в области сердца. Для этого электрод перемещается продольными и круговыми движениями по области сердца. Продолжительность процедуры составляет 4-8 минут, проводится ежедневно, а курс лечения составляет 15-20 процедур.
При ИБС (без выраженных изменений ЭКГ с гипертонической болезнью) и 2-й и 3-й степени, или без упоминания о гипертонической болезни), рекомендуется применение воздействия средней интенсивности в области сердца. Для этого электрод перемещается продольными и круговыми движениями по области сердца. Продолжительность процедуры составляет 12-15 минут, проводится ежедневно или через день, а курс лечения составляет 12-15 процедур.

Круговыми движениями от ключицы до реберной дуги и от грудцы до передней подмышечной линии слева, минуя область сердца. Продолжительность процедуры составляет 10-15 минут, проводится ежедневно или через день, а курс лечения составляет 12-15 процедур.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Для лечения полиартрита и артрита эффективно применять контактную методику в лобильном режиме на область пораженных суставов. Данный метод включает плавное перемещение электрода по суставу, используя продольные и круговые движения. Это позволяет достичь наилучшего результата в терапии данных заболеваний.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Существует ряд медицинских состояний, при которых не рекомендуется использовать массажер.
Среди них: сердечно-сосудистая недостаточность, аритмия, плохая свертываемость крови, кровотечения, тромбофлебит, купероз, туберкулез, онкология, высокая температура или лихорадка, а также избыточный рост волос на лице.
Не стоит использовать массажер во время беременности.
Следует избегать использования массажера, если у человека имеются врожденные кардиостимуляторы, индивидуальная непереносимость электрического тока или нарушения кожной чувствительности. Кроме того, не рекомендуется использовать устройство в состоянии алкогольного опьянения.
При выборе массажера необходимо учитывать состояние своего здоровья и проконсультироваться с врачом, во избежание возможных негативных последствий.

ТОВАР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Напомним, что при проведении домашней дарсонвализации в профилактических целях необходимо предварительно проконсультироваться с лечащим врачом. Здоровье и красота кожи – наша главная ценность!

Уникальная насадка-электрод эллиптической формы (ребелок) – идеальный помощник для проведения омолаживающих процедур. Предназначена для эффективных манипуляций по уходу за кожей лица и тела. Подходит для проведения лифтинга кожи, профилактики неврозов и расстройств сна. Благодаря своей форме, насадка позволяет регулировать площадь воздействия от точечного до более обширного, что делает ее универсальным инструментом для различных процедур.

Насадка-электрод для точечного воздействия (капелька) – прекрасно справляется с точечными воспалениями. Предназначена для профилактики местных высыпаний на коже и угрей. Она обладает самой высокой частотой тока, что позволяет эффективно бороться с проблемами кожи.

Универсальная насадка-электрод (грибок) – обладает мощным бактерицидным действием. Подходит для проведения дарсонвализации на более широких частях лица и тела, а также на руках, ногах, бедрах и ягодицах. Она идеально подходит для профилактики целлюлита, возникшего расширения вен, остеохондроза и длительно незаживающих ран.

Электрод-расческа – нормализация салыной секреции и общего состояния волос. Применяется для ухода за волосами и кожей головы. Она эффективно борется с проблемами выпадения волос (алопеции) и себореи, а также стимулирует волосные фолликулы и улучшает состояние волос.

Насадка-электрод для точечного воздействия (капелька) – прекрасно справляется с точечными воспалениями. Предназначена для профилактики местных высыпаний на коже и угрей. Она обладает самой высокой частотой тока, что позволяет эффективно бороться с проблемами кожи.

Универсальная насадка-электрод (грибок) – обладает мощным бактерицидным действием. Подходит для проведения дарсонвализации на более широких частях лица и тела, а также на руках, ногах, бедрах и ягодицах. Она идеально подходит для профилактики целлюлита, возникшего расширения вен, остеохондроза и длительно незаживающих ран.

Электрод-расческа – нормализация салыной секреции и общего состояния волос. Применяется для ухода за волосами и кожей головы. Она эффективно борется с проблемами выпадения волос (алопеции) и себореи, а также стимулирует волосные фолликулы и улучшает состояние волос.

Внимание! Перед проведением процедуры дарсонвализации необходима предварительная консультация лечащего врача.



ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ В РАБОТЕ ПРИБОРА И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ:

1. Неисправность: Прибор не работает.
Возможные причины:
- Не подключен к сети;
- Регулятор интенсивности выключен;
- Герметичность стеклянного электрода нарушена;
- Прибор неисправен.
Способы устранения:
- Проверьте подключение прибора к сети и надежность контакта вилок в розетке;
- Включите регулятор интенсивности;
- Попробуйте установить другой электрод, если необходимо, обратитесь в сервисный центр или приобретите новый;
- Перед заменой электрода всегда выключайте питание прибора. Никогда не прикасайтесь к гнезду для установки электрода во включенном состоянии аппарата. Обратитесь в сервисный центр для проведения проверки и ремонта прибора.

2. Неисправность: Воздействие аппарата стало слабее, разряд более «калоный».
Возможные причины:
- Загрязнена поверхность стеклянного электрода;
- Напряжение питания отклоняется от необходимого значения 220 В, 50 Гц.
Способы устранения:
- Проведите очистку электрода.
- Убедитесь, что напряжение питания соответствует необходимому значению.
Важно помнить, что при любых неисправностях необходимо обращаться в сервисный центр для проведения проверки и ремонта прибора. Также следует соблюдать меры предосторожности при замене электрода и работе с прибором.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ:

Для обеспечения безопасной и долговечной работы прибора необходимо соблюдать ряд правил по его техническому обслуживанию и хранению.
• Отключайте прибор из электросети, если он не используется.
• Избегайте попадания воды и других жидкостей в устройство, чтобы избежать повреждения дарсонвала.
• Для защиты прибора и стеклянных электродов от ударов следует обращать особое внимание на хранение и транспортировку.
• Не рекомендуется поднимать и тянуть прибор за шнур.
• Следует избегать перемещения шнура тяжелыми предметами.
• При длительном хранении прибора рекомендуется выбрать чистое и сухое место, избегая прямых солнечных лучей.
• Хранить прибор вдали от источников открытого огня и разогретых поверхностей.
• Прибор следует хранить в недоступных для детей местах.
• Для обеспечения долгой и бесперебойной работы прибора необходимо соблюдать инструкцию по эксплуатации. Гарантия на прибор действует только при условии соблюдения этих правил.

СПОСОБЫ ОЧИСТКИ:

Чтобы очистить прибор, необходимо отключить его от электросети.

Рекомендуется использовать мягкую, слегка увлажненную хлопковую ткань для протирки устройства и насадка-электрода. Можно использовать нейтральное моющее средство или спиртовой раствор. После очистки прибора необходимо дать ему полностью высохнуть перед повторным использованием.
Внимание! Устройство можно снова использовать только после того, как оно полностью высохнет.

Соблюдение этих правил поможет вам сохранить прибор в исправном состоянии на долгие годы и обеспечить безопасность его использования.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Данное изделие следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.

Характеристики:

Дарсонваль – импульсный массажер для лица, тела и волос с 4 насадками с аргонем
Артикул KZ 1174, белый
Материал: АБС-пластик, стекло.
Напряжение: 220В, 50/60 Гц
Мощность: 20 Вт.
Цвет: белый.
Формо выданного сигнала: импульсный с высокочастотным наполнением.
Комплектация: Прибор – 1 шт., стеклянная насадка-электрод – 4 шт., инструкция по эксплуатации.

ТОВАР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ.



KZ 1422
МАССАЖЕР ВИБРАЦИОННЫЙ для лица и тела
DAY JOY

KZ 1166
МАССАЖЕР для ног
КОМПРЕССИОННЫЙ
ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ