



#### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- Никогда не оставляйте массажер включенным без присмотра.
- Не накрывайте массажер при включенном питании.
- Используйте массажер только в помещении.
- Пожалуйста, не вставляйте на массажер и не давите на него сильно.
- Не вставляйте посторонние предметы в массажер во время работы.
- Немедленно прекратите использование массажера, если массажер или шнур повреждены.
- Не используйте массажер рядом с водой, если у вас мокрые ноги или в сонном состоянии.
- Люди, страдающие любым из перечисленных ниже заболеваний, должны проконсультироваться с врачом перед использованием массажера: рак, остеопороз, повышенная температура, расстройство сознания, эпилепсия, туберкулез, сердечная дисфункция или кровотечение.
- Беременным женщинам также следует проконсультироваться с врачом перед использованием массажера.
- Не используйте массажер в сочетании со следующим медицинским оборудованием:
  - а) Кардиостимуляторы и другие имплантируемые медицинские электронные устройства;
  - б) Медицинское оборудование для поддержания жизни, такое как сердечное легочное;
  - в) Медицинское электронное оборудование (для временной диагностики), такое как аппарат ЭКГ, закрепляемый на пациенте для мониторинга данных работы сердца.

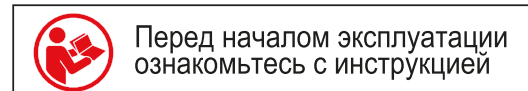

Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с инструкцией

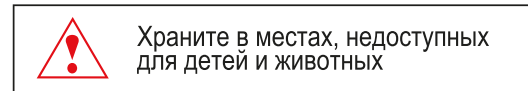

Храните в местах, недоступных для детей и животных

06

#### Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.

Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel.  
Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059  
www.bradex.co.il

#### Импортер на территории РФ:

ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru

#### Импортер на территории Республики Беларусь:

ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д. 9 комн. 34/4. УНП 192409754.  
Сайт: www.bradex.by.  
E-mail: info@bradex.by.

Страна происхождения: Китай

#### Изготовитель:

Джецзян Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед.  
Адрес: Синьзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708.  
тел: +86-574-6560937, факс: +86-574-6560938 e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com

#### Международная торговая марка «BRADEX».


Reg.№ 1419183  
Израиль - Reg. №204012  
Россия -- Reg. № 444287, № 683532

Срок эксплуатации: 1 год с начала эксплуатации.  
Гарантийный срок: 1 год.  
Дату производства смотрите на упаковке.



07

KZ 0575  
МАССАЖНАЯ ПОДУШКА  
«БЛАЖЕНСТВО КОМФОРТ»

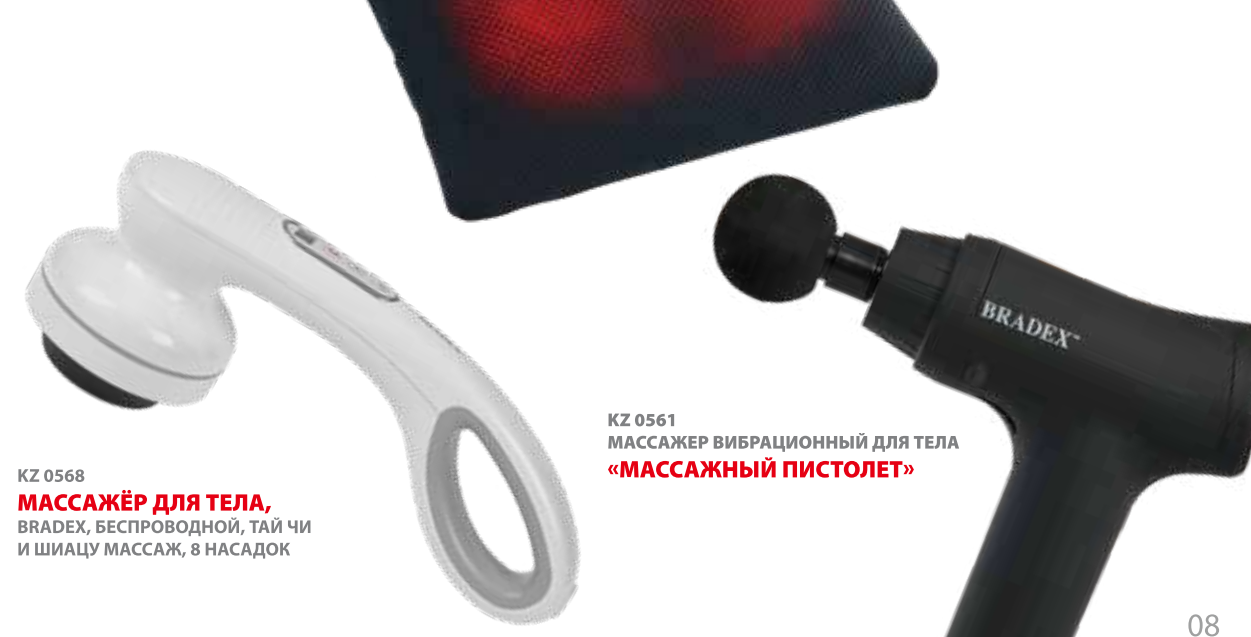

KZ 0568  
МАССАЖЁР ДЛЯ ТЕЛА,  
BRADEX, БЕСПРОВОДНОЙ, ТАЙ ЧИ  
И ШИАЦУ МАССАЖ, 8 НАСАДОК

KZ 0561  
МАССАЖЕР ВИБРАЦИОННЫЙ ДЛЯ ТЕЛА  
«МАССАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ»

08

KZ 0562  
МАССАЖЕР ДЛЯ СТОП И ЛОДЫЖЕК  
«БЛАЖЕНСТВО КОМПАКТ»



KZ 0569  
МАССАЖЁР ДЛЯ НОГ  
РОЛИКОВО-КОМПРЕССИОННЫЙ  
«СЕН СИП»

09



KZ 1166  
КОМПРЕССИОННЫЙ ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ  
МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ

## МАССАЖЕР ДЛЯ СТОП И ЛОДЫЖЕК БЛАЖЕНСТВО ДРИМ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
KZ 1177

BRADXRUSSIA  
BRADEXMOSCOW



Массажер для стоп и лодыжек «БЛАЖЕНСТВО ДРИМ» – ваш домашний профессиональный массажист. Лёгкое многофункциональное устройство, идеально совмещает в себе два типа воздействия: традиционный роликовый массаж, с точечной проработкой акупунктурных зон стопы и интенсивный компрессионный массаж. Такая комбинация разных техник массажа позволит быстро избавиться от усталости, снять мышечное напряжение и болезненные ощущения в ногах, а также подарит непревзойденное удовольствие и отличное самочувствие. Кроме того, комплексное воздействие улучшает лимфодренаж и кровоток нижних конечностей, что, в свою очередь, благотворно влияет на укрепление стенок сосудов и снятию отечности. Регулярное использование массажера поможет нормализовать сон и повысить иммунную сопротивляемость организма. В устройстве предусмотрено три режима работы: автоматический, индивидуальный и режим ручной настройки. Кроме того, есть возможность выбора скорости вращения массажных роликов и направления их движения. Компактность массажера позволяет с легкостью переносить его в любое удобное место в доме. Достоинством модели является низкий уровень шума во время работы, что позволяет использовать массажер в условиях рабочего офиса, не доставляя неудобств остальным сотрудникам. Наличие пульта управления – еще один приятный бонус, с помощью которого использование массажера станет намного удобнее, особенно это смогут оценить пожилые люди и люди с ограниченными физическими возможностями. Благодаря особенностям конструкции, массажер можно применять не только для стоп и лодыжек, но и для проработки кистей рук и предплечий. Устройство неприхотливо в уходе. Поверхность легко протереть сухой салфеткой, а съемные чехлы, при необходимости можно постирать.

#### МАССАЖЕР РЕКОМЕНДОВАН:

- при малоподвижном образе жизни;
- при отечности ног;
- при повышенных нагрузках на нижние конечности (длительная ходьба, избыточный вес, стоячая работа);
- для профилактики варикоза;
- при болевых ощущениях (после занятий спортом, при восстановлении после перенесенных травм);
- при усталости и повышенном уровне стресса.

01

#### НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАССАЖЕРА:

- во время беременности;
  - после недавно перенесенных травм;
  - при опухолях различного рода;
  - при онкологических заболеваниях;
  - при сосудистых заболеваниях;
  - при склонности к тромбообразованию;
  - при следующих заболеваниях: остеопороз, расстройство сознания, эпилепсия, туберкулез, сердечная дисфункция или кровотечение.
- В каждом из перечисленных случаев требуется консультация врача.

Массажер «Блаженство Дрим» идеальное решение для тех, кто заботится о здоровье своих ног и организма в целом. Бережно прорабатывая необходимые акупунктурные точки стопы, он поможет снизить уровень стресса в организме и улучшить качество сна, позволит добиться максимального расслабления и обеспечит общий оздоравливающий эффект для всего организма. Использование массажера на постоянной основе станет отличной профилактикой варикозного расширения вен и плоскостопия.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Массаж акупунктурных точек стопы
- 3 режима работы
- 4 автоматические программы
- 3 скорости и 2 направления вращения
- Съемные чехлы
- Пульт дистанционного управления



02

#### ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



Включение/выключение прибора.  
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ  
предполагает 4 варианта массажа.  
ПРОГРЕВ  
РУЧНОЙ РЕЖИМ  
позволяет самостоятельно регулировать интенсивность и направление массажа при помощи кнопок: «SPEED» и «VEER».  
НАПРАВЛЕНИЕ  
позволяет регулировать направления, в котором будут вращаться массирующие валики.  
СКОРОСТЬ  
позволяет регулировать скорость вращения массирующих валиков.

#### ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ



Включение/выключение прибора.  
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ  
предполагает 4 варианта массажа.  
ПРОГРЕВ  
РУЧНОЙ РЕЖИМ  
позволяет самостоятельно регулировать интенсивность и направление массажа при помощи кнопок: «SPEED» и «VEER».  
НАПРАВЛЕНИЕ  
позволяет регулировать направления, в котором будут вращаться массирующие валики.  
СКОРОСТЬ  
позволяет регулировать скорость вращения массирующих валиков.

03

**ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СЕАНСА ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЕ МАССАЖЕР ОТ СЕТИ.**

#### ИНСТРУКЦИЯ:

##### Начало работы

- Подключите массажер к электросети.

- Нажмите кнопку включения.

- Установите необходимый режим массажа. Массажер для ног запустится в автоматическом режиме 1, который является общим массажем.
- Чтобы выключить, удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, массажер «выключится». Пожалуйста, всегда выключайте массажер перед отключением от сети.
- В режиме «авто» массажер для ног выключится через 15 минут.
- Рекомендуется не превышать продолжительность массажа более 30 минут за один раз.

##### Программы:

На выбор предлагаются 4 программы. При запуске массажера, по умолчанию будет установлена программа 1. Для изменения программы нажмите кнопку «автоматический режим». На диаграммах рефлекторных точек стопы показаны сенсорные зоны стопы, массаж которых оказывает благотворное воздействие на различные части тела.

##### Автоматический режим

При включенном питании нажмите кнопку «автоматический режим» и выберите желаемую программу массажа.  
**Программа 1:** Общий массаж стоп.

**Программа 2:** Фокусировка на сенсорные зоны головы, позвоночника, поясничного отдела позвоночника, плеч, ушей и глаз.  
**Программа 3:** Фокусировка на сенсорные зоны кишечника, печени и желудка.

**Программа 4:** Фокусировка на сенсорные зоны ног, репродуктивной системы, мочевыделительной системы и мочевого пузыря.

##### Прогрев

Чтобы включить функцию прогрева, нажмите кнопку ПРОГРЕВ. Для отключения, повторно нажмите кнопку ПРОГРЕВ.

##### Ручной режим

Нажмите кнопку «ручной режим». Для регулировки скорости массажа нажмите кнопку «SPEED». На выбор доступны 3 уровня скорости. С помощью кнопки «VEER» можно отрегулировать направление массажа. Время цикла массажа для каждого автоматического режима составляет 15 минут, чтобы повторить цикл через 15 минут, снова нажмите кнопку режима.

##### ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- После использования, протрите массажер сухой салфеткой. Перед чистой убедитесь, что он отключен от сети.
- Не используйте спирт, разбавитель или другие

04

- агрессивные растворители для чистки массажера.
- Не протирайте влажной или мокрой салфеткой. Перед чистой убедитесь, что массажер выключен и отсоединен от сети.
- Храните массажер в чистом и сухом месте.
- Не храните его в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, вблизи источников тепла или в условиях высокой температуры.
- Будьте осторожны при использовании массажера и не роняйте его при перемещении.

##### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**KZ 1177**  
МАССАЖЕР ДЛЯ СТОП И ЛОДЫЖЕК «БЛАЖЕНСТВО ДРИМ», СЕРЕБРЯНЫЙ.  
Материал: АБС пластик, полиэстер, металл.  
Размер: 60\*33\*25 см.  
Цвет: серебряный.  
Мощность: 40 Вт.  
Номинальное напряжение: 220-240 В.  
Автоматическое отключение: 15 мин.  
Работает от сети.  
Комплектация: массажер – 1 шт., инструкция, пульт управления.

##### ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

##### УТИЛИЗАЦИЯ:

Данное изделие следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.

##### ТОВАР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ.

05