

**Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.**  
Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel.  
Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059. www.bradex.co.il

**Импортер на территории РФ:**  
ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru

**Импортер на территории Республики Беларусь:**  
ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д. 9 комн. 34/4. УНП 192409754. Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by.

**Страна происхождения:** Китай

**Изготовитель:** Джезян Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед. Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708. Тел: +86-574-6560937, факс: +86-574-6560938, e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com

**Международная торговая марка «BRADEX».**

Reg. №1419183  
Израиль - Reg. №204012  
Россия - Reg. №444287, №683532

Срок эксплуатации: 1 год с начала эксплуатации.  
Гарантийный срок: 1 год.  
Дату производства смотрите на упаковке.

ТОВАР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ.

**ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СЕАНСА ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЕ МАССАЖЕР ОТ СЕТИ.**



Служба заботы о клиентах



Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с инструкцией

Храните в местах, недоступных для детей и животных



KZ 1178  
МАССАЖНАЯ ПОДУШКА ДЛЯ ТЕЛА  
**РЕЛЬЕФ КОМФОРТ**



KZ 1422  
МАССАЖЕР ВИБРАЦИОННЫЙ  
ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА  
**DAY JOY**



KZ 1173  
МАССАЖЕР ДЛЯ СТОП И ЛОДЫЖЕК  
**ФУДЖИ**

KZ 1427  
МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА БЕСПРОВОДНОЙ  
**ВОЛНА**



KZ 1181  
МАССАЖЕР ДЛЯ СТОП И ЛОДЫЖЕК  
**БЛАЖЕНСТВО АЛЬФА**

# МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ СТЕЛЛАР

**BRADEX™**  
Health & Beauty



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KZ 1179



**BRADEXRUSSIA**

**BRADEXMOSCOW**



## Спасибо за покупку нашей продукции!

Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации перед использованием, чтобы вы могли использовать ваш новый массажер для ног «СТЕЛЛАР» правильно и безопасно. Компания не несёт ответственности за любые последствия, возникшие в результате несоблюдения правил эксплуатации устройства.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Прочитайте все меры предосторожности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве по эксплуатации до того, как начнёте использовать устройство, чтобы снизить вероятность возникновения травмы. Компания не несёт ответственности за телесные повреждения или материальный вред, возникшие в результате неправильного использования устройства.

1. Не касайтесь устройства мокрыми руками.
2. Не допускайте попадания на устройство воды или других жидкостей.
3. Не засыпайте во время использования устройства.
4. Не используйте устройство в состоянии алкогольного опьянения.
5. В случае возникновения дискомфорта, прекратите использование устройства.
6. Используйте устройство только для массажа ног.
7. Не используйте устройство дольше 30 минут подряд.
8. Не используйте устройство в случае, если тканевое покрытие повреждено.
9. Во избежание побочных эффектов не используйте устройство за час до и после еды.
10. Не включайте функцию подогрева, если температура в помещении, где используется устройство, ниже комнатной температуры. Рекомендуется повысить температуру до уровня нормы, прежде чем включать функцию подогрева.
11. Если устройство используется сразу после перемещения из холода в тепло, скопление водяного пара внутри устройства может повлиять на нормальную работу устройства или стать причиной механического повреждения. Во избежание этого перед использо-

ванием устройства оставьте его на час в помещении с нормальной комнатной температурой.

12. Производите чистку устройства только в выключенном состоянии.
13. Во избежание получения ожогов используйте функцию подогрева с осторожностью.
14. Не допускайте использования устройства на нечувствительных или сверхчувствительных участках кожи или частях тела с плохим кровообращением.
15. Храните устройство в месте, недоступном для детей.
16. Во избежание возгорания, удара током или получения травмы из-за перегрева мотора устройства не используйте его под подушкой или одеялом.
17. Во время использования ничем не накрывайте устройство во избежание неисправностей в связи с перегревом мотора.
18. Дети и лица с ограниченными возможностями или психическими расстройствами могут использовать устройство только под присмотром.
19. Не используйте устройство, если шнур питания или вилка повреждены, наблюдаются нарушения в работе устройства, устройство падало, было повреждено или падало в воду.
20. Не вставляйте и не бросайте ничего в отверстия устройства.
21. Не используйте устройство для самодиагностики или лечения.
22. Во избежание поломки устройства не используйте его в влажном или пыльном помещении.
23. Не используйте устройство в помещении, где температура превышает 40 градусов.
24. Не используйте устройство на улице.
25. Запрещается использование массажера рядом с электрическими нагревателями или под прямыми солнечными лучами.

В случае возникновения неисправности необходимо обратиться к продавцу или в Службу заботы о клиентах производителя.

## ⚠ ВАЖНО:

**НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА ДО НАЧАЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:**

- прохождение лечения;
- ощущение дискомфорта во время использования устройства;
- гипертония, болезни сердца, церебральный атеросклероз, церебральный тромбоз;
- онкологические заболевания;
- беременность или менструация;
- остеопороз;
- ношение кардиостимулятора или других имплантируемых медицинских устройств;
- острое течение заболевания;
- возраст младше 18 лет.

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

Если вы столкнулись с неисправностью при использовании устройства, предпринимайте указанные действия. Если вы не можете устранить неполадки или устройство по-прежнему не работает должным образом, прекратите его использование, выключите питание и отдайте его на ремонт в специализированный сервисный центр производителя. Не разбирайте устройство самостоятельно!

Проблема	Возможные причины	Устранение неисправности
Не работает	1. Не подключен к сети 2. Не нажата кнопка включения	1. Проверьте подключение устройства к сети 2. Нажмите кнопку включения


Проблема	Возможные причины	Устранение неисправности
Внезапная остановка работы	1. Отключение питания 2. Работа дольше 15 мин 3. Устройство перегрелось 4. Слишком большое давление на устройство	1. Проверьте подключение устройства к сети 2. Перезапустите устройство 3. Дайте устройству остыть, затем перезапустите 4. Перезапустите устройство

## НАСТРОЙКИ:

Время: настройка времени (автоматическое время работы 15 мин)

Интенсивность: настройка интенсивности массажа (9 уровней)

Вкл/выкл: включение/выключение устройства

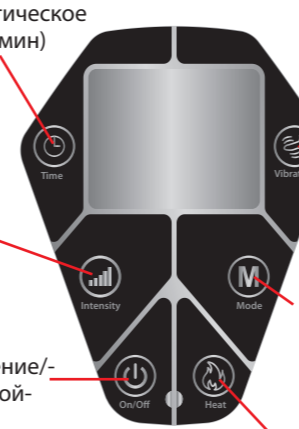

Вид массажа: выбор вида воздействия на ноги (F1 подача воздуха + роликовый массаж, F2 подача воздуха + компрессионный массаж, F3 вибрационный массаж)

Режим: выбор режима (5 автоматических режимов)

Подогрев: настройка подогрева

## РАБОТА УСТРОЙСТВА:

Поместите массажер для ног на полу перед собой и подключите к сети. Займите удобное положение сидя.

1. Нажмите кнопку включения.
2. Установите время работы устройства (10, 15, 20, 25 или 30 минут). По умолчанию установлено время 15 минут.
3. Установите интенсивность. Можно выбрать один из девяти уровней. По умолчанию установлен уровень 5.
4. Выберите вид массажа: F1 (подача воздуха + роликовый массаж), F2 (подача воздуха + компрессионный массаж), F3 (вибрационный массаж). Каждый из вариантов можно использовать для любого режима работы устройства.
5. Если это необходимо, включите или выключите подогрев.
6. Установите один из 5 режимов:



**Режим 1:** компрессия + подогрев + движение роликов в двух направлениях

**Режим 2:** компрессия + подогрев + прерывистое движение роликов по часовой стрелке

**Режим 3:** компрессия + подогрев + прерывистое движение роликов против часовой стрелки

**Режим 4:** подогрев + движение роликов в двух направлениях

**Режим 5:** компрессия + подогрев

7. После использования выключите устройство и отключите его от сети.

## ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

### Хранение:

1. Храните устройство в сухом и хорошо вентилируемом месте.
2. Не обматывайте устройство кабелем.
3. Избегайте контакта устройства с острыми предметами.
4. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и высокой температуры.
5. Регулярно производите чистку устройства.
6. Если продукт не используется в течение долгого времени, храните его в пылезащитном чехле (не входит в комплект).

### Чистка:

1. Прежде чем провести чистку, выключите устройство и отключите его от сети.
2. Используйте сухую ткань, чтобы очистить поверхность устройства.
3. Не используйте агрессивные моющие средства.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

### Массажер для ног «СТЕЛЛАР»

Материал: металл, пластик, ТПР, полиэстер.  
Цвет: чёрный.  
Размер: 46,5x26x40,5 см.  
Мощность: 50 Вт.  
Работает от сети: 110-220 В, 50/60 Гц.  
Автоматическое время работы: 15 мин.  
Прогрев до 45-50°C.  
3 вида массажа.  
5 автоматических режимов.  
9 уровней интенсивности массажа.

Комплектация:  
массажер – 1 шт.,  
пульт управления – 1 шт.,  
инструкция – 1 шт.