

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.

Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel. Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059. www.bradex.co.il.

Импортер на территории РФ: ООО «Технологии здоровья».

Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66. www.bradex.ru.

Импортер на территории Республики Беларусь: ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д. 9 комн. 34/4. УНП 192409754.

Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by

Страна происхождения: Китай. Изготовитель: Джэцзян Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед.

Адрес: Синьцзян Роуд, 5, Индустриальная зона Байтанг, город Нинбо, КНР. 315708. тел: +86-574-6560937,

факс: +86-574-6560938. e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com.

Международная торговая марка «BRADEX».

Рег. №1419183.

Израиль - Рег. №204012.

Россия - Рег. №444287, №683532

Срок эксплуатации: 1 год.

Гарантийный срок: 1 год.

Дату производства смотрите на упаковке.



Служба заботы о клиентах




Перед началом эксплуатации
ознакомьтесь с инструкцией

Храните в местах, недоступных
для детей и животных

ИРРИГАТОР УЛЬТРА 300

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KZ 1371

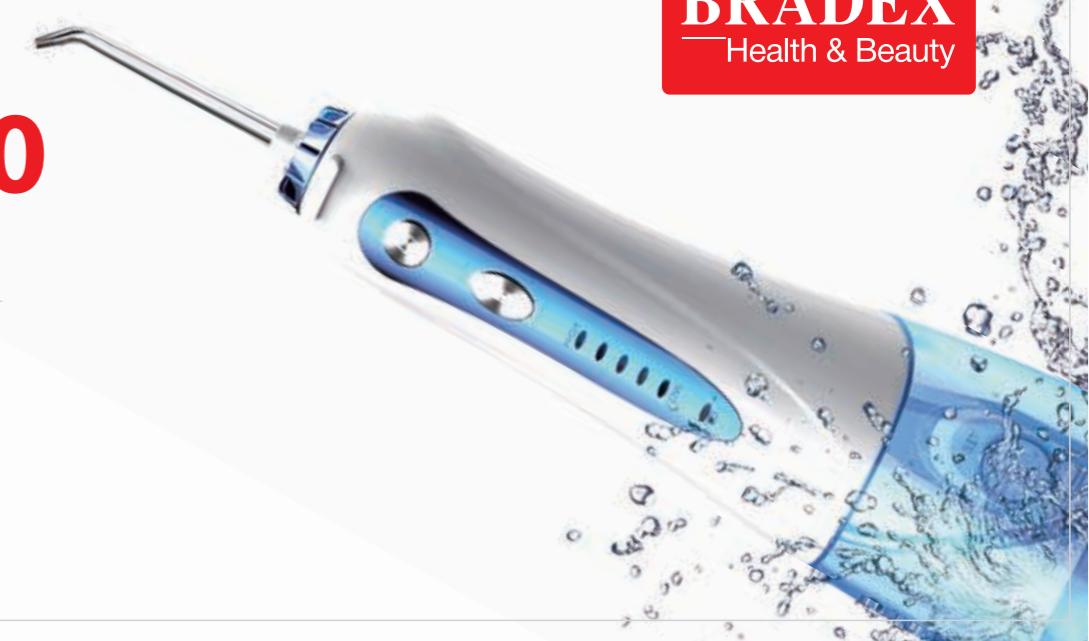

Дорогой покупатель!

Благодарим за выбор продукции торговой марки BRADEX и оказанное доверие нашей компании! Мы рады предложить вам товары для ежедневного профессионального ухода за полостью рта в домашних условиях. Каждый продукт разработан и изготовлен в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну современных устройств для проведения данной гигиенической процедуры.

Ирригаторы BRADEX подходят как для индивидуального, так и семейного применения. Удобство в использовании сделают гигиену полости рта максимально комфортной и бережной.

С полным ассортиментом нашей продукции вы можете ознакомиться на сайте bradex.ru.

С теплом и заботой о вашем здоровье, команда BRADEX.

Ирригатор «УЛЬТРА 300» - портативный ирригатор для ежедневной гигиены полости рта в домашних условиях, на работе, в путешествии. Устройство имеет пять уровней ирригации, чтобы выбрать комфортную интенсивность воздействия. В комплект входят пять съемных насадок: две стандартные, ортодонтическая, пародонтологическая и насадка-ложка для чистки языка. Для удобства использования насадки вращаются на 360 градусов. Регулярное использование ирригатора является эффективной профилактикой зубного камня, карIESа, а также увеличивает срок службы имплантатов, виниров, пломб. Удаляет бактерии, налет и остатки пищи даже из самых труднодоступных мест между зубами и деснами. Рекомендовано для профилактики заболеваний зубов и десен во время беременности, лактации. Ирригатор прост в использовании, удобно лежит в руке, благодаря эргономичному дизайну корпуса. Устройство быстро заряжается через USB-кабель за 3-5 часов. Мощный аккумулятор обеспечивает беспроводную работу в течение 12 суток.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Заболевания зубов, десен и ротовой полости в фазе обострения, острые сердечно-сосудистые заболевания, недавно перенесенные операции в полости рта, повышенная чувствительность зубов, кровоточивость десен, открытая рана на языке или в полости рта.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

Товар не является медицинским изделием.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Ежедневная гигиена полости рта в домашних условиях, в путешествии
- Очищение и уход за ортодонтическими конструкциями и брекет-системами
- Чистка языка, неба и внутренних поверхностей щек
- Оздоравливающий массаж десен
- Профилактика зубного камня, карIESа, воспаления десен
- Профилактика заболеваний зубов и десен во время беременности, лактации, при сахарном диабете



Насадка ложка 1 шт.
Ортодонтическая насадка 1 шт.
Периодонтологическая насадка 1 шт.
Стандартная насадка 2 шт.

ВИДЫ СЪЕМНЫХ НАСАДОК

1. **Насадка-ложка** для чистки языка: способствует устранению налета на языке, уменьшает количество бактерий на слизистых полости рта, позволяет добиться свежего дыхания. Регулярное использование этой насадки снижает риск воспаления и патологических процессов, в том числе карIESа. Подходит для чистки неба и внутренних поверхностей щек.

2. **Ортодонтическая насадка:** применяется для чистки брекетов и других ортодонтических конструкций. Помогает удалять частички еды и мягкий налет.

3. **Периодонтологическая насадка:** используется для глубокого очищения десневых карманов. Эффективно массирует десны и снижает их кровоточивость. Наконечник из мягкого силикона не травмирует десну. Рекомендуется использовать при наличии ортопедических конструкций.

4. **Стандартная насадка:** хорошо очищает эмаль между зубами, позволяет выполнить деликатный массаж десен и освежить дыхание.

Насадки являются предметом индивидуального использования, подлежат регулярной чистке.

РЕЖИМЫ ИРРИГАЦИИ:


1. Мягкий режим, 276 кПа
Подходит для начинающих

2. Деликатный режим, 345 кПа
Для чувствительных зубов

3. Нормальный режим, 483 кПа
Для ежедневной гигиены полости рта

4. Интенсивный режим, 621 кПа
Для эффективного очищения зубов

5. Пульсирующий режим, 758 кПа
Для глубокого очищения зубов

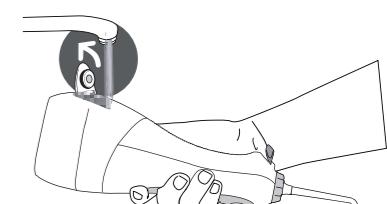

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Перед ирригацией полости рта добавьте теплую воду в резервуар. Чтобы наливать воду из-под крана, держите ирригатор горизонтально, предварительно открыв крышку резервуара. Также можно наливать воду в аппарат с помощью стакана.

2. Установите нужную насадку. Для этого зафиксируйте ее в отверстии в верхней части корпуса до характерного щелчка.

3. Включите ирригатор, нажав и удерживая в течение нескольких секунд кнопку ON/OFF.

4. Затем выберите комфортный режим работы устройства. Для этого повторно нажмите на кнопку MODE. Выбор режима работы сопровождается световой индикацией.

5. Приступайте к чистке полости рта. Слегка приоткройте рот, направьте насадку на зубы, десны, чтобы поток воды попадал на необходимые зоны.

6. После процедуры выключите ирригатор, нажав и удерживая в течение нескольких секунд кнопку ON/OFF.

7. Извлеките насадку, нажав на кнопку извлечения насадки на корпусе аппарата.

ВАЖНО: не нажмите на кнопку извлечения насадки во время работы устройства.

8. Чтобы снять резервуар для воды, просто потяните за него, как показано на рисунке.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Если устройство не используется в течение длительного времени, необходимо выплыть воду из резервуара и хранить ирригатор в сухом прохладном помещении, в недоступных для детей местах.

Не используйте устройство в помещениях с повышенной температурой и влажностью.

СПОСОБЫ ОЧИСТКИ

После ирригации выпустите воду из резервуара и снова запустите устройство на 2-3 секунды, чтобы удалить остатки воды из аппарата.

Для очистки устройства используйте сухую мягкую ткань, чтобы вытереть корпус, насадки.

Резервуар можно промыть мыльной водой и затем протереть сухой мягкой тканью.

Не погружайте корпус ирригатора в воду.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Допускается в производственной упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ

Данное изделие следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ирригатор «УЛЬТРА 300»

Артикул KZ 1371, мультиколор

Материал: ABS-пластик, ПК.

Цвет: мультиколор.

Давление воды: 276 кПа-758 кПа.

Работает от аккумулятора - 2000 мАч.

Объем резервуара для воды - 300 мл.

Время зарядки: 3-5 часов. Время работы: 60 мин.

Пять режимов давления воды. Защита от перегрева.

Комплектация: ирригатор - 1 шт., сменные насадки - 5 шт., USB-провод - 1 шт., инструкция.



ИРРИГАТОР
УЛЬТРА 800
KZ 1372



ИРРИГАТОР
УЛЬТРА 150
KZ 1370

