

200x490 мм
(в сложенном виде 200x70мм, гармошка)

ИРРИГАТОР УЛЬТРА 230

BRADEX
Health & Beauty

RU BRADEXRUSSIA
RU BRADEXMOSCOW

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
KZ 1381



**ИРРИГАТОР
УЛЬТРА 800
KZ 1372**

**ИРРИГАТОР
УЛЬТРА 300
KZ 1371**



Дорогой покупатель!

Благодарим за выбор продукции торговой марки BRADEX и оказанное доверие нашей компании! Мы рады предложить вам товары для ежедневного профессионального ухода за полостью рта в домашних условиях. Каждый продукт разработан и изготовлен в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну современных устройств для проведения данной гигиенической процедуры.

Ирригаторы BRADEX подходят как для индивидуального, так и семейного применения. Удобство в использовании сделают гигиену полости рта максимально комфортной и бережной. С полным ассортиментом нашей продукции вы можете ознакомиться на сайте bradex.ru.

С теплом и заботой о вашем здоровье, команда BRADEX.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- Отсоедините резервуар для воды от основного корпуса и заполните его чистой теплой водой до указанного уровня. Если используется специальный раствор, следуйте рекомендациям производителя для его приготовления и заполнения.
- Установите нужную насадку. Для этого зафиксируйте ее в отверстии верхней части корпуса до характерного щелчка и убедитесь, что она надежно закреплена.
- Включите ирригатор, нажав и удерживая в течение нескольких секунд кнопку ON/OFF.
- Выберите комфортный режим работы устройства (желаемое давление струи воды). Для этого повторно нажимайте на кнопку MODE. Выбор режима работы сопровождается световой индикацией. Для начала можно установить минимальную интенсивность и постепенно увеличивать до комфортного уровня.
- Приступайте к чистке полости рта. Слегка приоткройте рот, возьмите ирригатор в руку и удерживайте его в удобной позиции, приближая насадку к полости рта. Расположите насадку под углом около 90

градусов к поверхности зубов, чтобы струя воды эффективно очищала межзубные промежутки и десна. Аккуратно перемещайте насадку вокруг зубов и десен, фокусируясь на местах скопления налета и пищевых остатков. Удерживайте струю воды на каждом месте в течение нескольких секунд, чтобы обеспечить комплексную очистку.

- После процедуры выключите ирригатор, нажав и удерживая в течение нескольких секунд кнопку ON/OFF.
- В ирригаторе 4 режима: мягкий, стандартный, пульсирующий и режим индивидуальной настройки DIY.

DIY (индивидуальная настройка): позволяет регулировать интенсивность струи и создавать персонализированные программы для ухода за полостью рта. Для этого кнопкой «MODE» выберите режим DIY, и во время работы удерживайте кнопку ON/OFF, давление струи будет меняться от меньшего к большему. Выберите подходящий уровень давления и отпустите кнопку ON/OFF. Персональная настройка сохранится при следующих включениях.

ВАЖНО: не нажимайте на кнопку извлечения насадки во время работы устройства.

Рекомендуется использовать портативный ирригатор в дополнение к ежедневной чистке зубов и использованию зубной нити. Частоту использования и длительность процедуры лучше обсудить со своим стоматологом. Помните, что эти указания являются общими рекомендациями, и всегда лучше проконсультироваться со специалистом.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК:

Проблема	Причина	Решение
Утечка жидкости между насадкой и прибором	- Повреждено уплотнительное кольцо в основании насадки - Насадка плохо зафиксирована	- Проверьте и замените уплотнительное кольцо - Снимите насадку и вставьте снова, до характерного щелчка

Проблема	Причина	Решение
Негерметичность входного отверстия для насадки	- Повреждено уплотнительное кольцо в основании насадки - Скопление загрязнений во входном отверстии	Обратитесь к фирме-продавцу или в Службу заботы о клиентах
Протечка резервуара	Недостаточное напряжение	Обратитесь к фирме-продавцу или в Службу заботы о клиентах
Слабое давление воды	Недостаточное напряжение	Полностью зарядить устройство

Проблема	Причина	Решение
Устройство не работает	Слабый уровень зарядки	Полностью зарядить устройство
Из насадки не поступает вода	Первое использование	Заполнить резервуар водой

Если предложенные решения не позволили решить проблему – не пытайтесь ремонтировать ирригатор самостоятельно. При обнаружении неисправностей обращайтесь к фирме-продавцу или в Службу заботы о клиентах, указанную на сайте производителя.

ГАРАНТИЯ:

Условия гарантии:

- Гарантия распространяется только на обслуживание и ремонт тех частей изделия, в которых обнаружены производственные дефекты.
- Если в течение гарантийного срока будет получена обоснованная

претензия о выявленном производственном дефекте, мы либо устраним брак, либо заменим изделие на то, которое функционально эквивалентно оригинальному изделию.

Гарантия не распространяется:

- При наличии механических или иных повреждений изделия, вызванных неправильной эксплуатацией прибора.
- В случае ремонта или модификации прибора самостоятельно, не в специализированном сервисном центре.
- В случае несоблюдения рекомендаций производителя по эксплуатации, уходу и хранению прибора, описанные в данной инструкции.
- На неисправности изделия, вызванные следующими причинами:
 - естественным износом частей изделия, имеющих ограниченный срок службы;
 - действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети и др.).


прямых солнечных лучей.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Данное изделие следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.

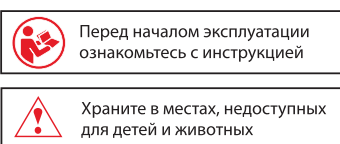

Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с инструкцией

Храните в местах, недоступных для детей и животных



Ирригатор является эффективным средством профилактики зубного камня и кариеса, а также замечательным инструментом для ухода за имплантатами, винирами, пломбами и брекет-системами. Его регулярное использование позволяет удалить бактерии, налет и остатки пищи даже из самых труднодоступных мест между зубами и деснами, что способствует общей гигиене полости рта и обеспечивает свежесть дыхания.

Ирригатор может быть полезен для всех, кто заботится о здоровье и хочет предотвратить заболевания десен и другие проблемы, связанные с полостью рта. Устройство поможет уменьшить воспаление и смягчить симптомы заболеваний пародонта и гингивита.

Особенно рекомендовано использование ирригатора для сохранения здоровья зубов и десен во время беременности и лактации, когда уход за полостью рта играет особую роль.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Запрещено использовать устройство в иных целях, кроме чистки полости рта.
- При первом использовании ирригатора поставьте интенсивность струи воды на минимальный уровень и постепенно увеличивайте ее, пока не найдете комфортное для вас значение.
- Используйте только чистую воду или специальные растворы, рекомендованные стоматологами. Не используйте химические или агрессивные растворы без консультации со специалистом.

- Не наливайте в резервуар воду выше 40 градусов, чтобы не обжечься.
- Не используйте для ирригации жидкости для полоскания полости рта, йод, солевые растворы, эфирные масла.
- Не используйте ирригатор без насадки. Не вынимайте насадку во время работы аппарата.
- Не оказывайте чрезмерное давление насадкой на зубы или десны, чтобы избежать их травмирования.
- Не направляйте струю воды прямо на десны или в другие чувствительные области полости рта, чтобы избежать повреждения или раздражения. Удерживайте ирригатор под углом примерно 90 градусов к поверхности зубов.
- Не направляйте воду под язык, в ухо, нос или другие delicate области. Аппарат способен создавать давление, которое может привести к серьезным повреждениям в этих областях.
- Следите за давлением воды, чтобы оно не было слишком высоким. Использование слишком сильного давления может привести к повреждению десен или эмали зубов. Не забывайте, что комфортное давление является индивидуальной настройкой и может отличаться от применяемого другими людьми
- Не сгибайте, не растягивайте и не скручивайте трубку насадки.
- Ирригатор автоматически выключается через 1 минуту 40 секунд использования.
- Не погружайте ирригатор полностью в воду.
- Храните устройство в недоступных для детей местах.
- После каждого использования промойте ирригатор чистой водой. Дождитесь полного удаления остатков раствора из резервуара и насадок.
- Если у вас есть какие-либо заболевания десен, ослабленный иммунитет или возникают какие-либо проблемы или боли во время использования ирригатора, рекомендуется обратиться к стоматологу для консультации и рекомендаций.

Помните, что эти правила являются общими рекомендациями, и всегда лучше проконсультироваться со специалистом, чтобы адаптировать их к вашим индивидуальным потребностям.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА:

- Перед первым использованием ирригатора необходимо полностью зарядить аккумулятор. Подключите USB-кабель к USB-порту вашего компьютера или любого другого устройства.
- Когда ирригатор заряжается, то поочередно мигают индикаторы режимов, начиная с индикатора режима DIY и далее Pulse, Soft, Normal.

Если индикаторы перестали мигать и все горят постоянно, значит зарядка устройства завершена.

- Запрещено использование устройства во время зарядки. Оно должно быть отключено. Полная зарядка занимает 3 часа.
- Обязательно зарядите аккумулятор, если аппарат не использовался в течение длительного времени.
- Чтобы продлить срок службы аккумулятора в ирригаторе, который не планируется использовать длительное время, полностью зарядите его перед хранением и время от времени заряжайте во время хранения.



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- Заболевания зубов, десен и ротовой полости в фазе обострения.
- Острые сердечно-сосудистые заболевания.
- Недавно перенесенные операции в полости рта.
- Повышенная чувствительность зубов, кровоточивость десен, открытая рана на языке или в полости рта.
- Дети младше 6 лет.
- Люди с ослабленным иммунитетом: при определенных состояниях ослабленного иммунитета (например, у людей, проходящих курс лечения онкологических заболеваний или имеющих иммуносупрессивное лечение) использование ирригатора может быть не рекомендовано.

Несмотря на все преимущества и пользу ирригатора, рекомендуется проконсультироваться с врачом или стоматологом о возможных противопоказаниях, чтобы узнать, подходит ли он вам и насколько безопасно его использование в вашей конкретной ситуации. Прибор не является медицинским изделием.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:



В комплект с ирригатором входят три стандартные насадки и одна насадка для чистки языка. Насадки позволяют проводить различные процедуры очистки полости рта, включая очистку зубов, десен и языка.



Стандартная насадка: хорошо очищает эмаль между зубами, позволяет выполнить деликатный массаж десен и освежить дыхание.

Насадка-ложечка для чистки языка: способствует удалению налета на языке, уменьшает количество бактерий на слизистых полости рта, позволяет добиться свежего дыхания. Регулярное использование этой насадки снижает риск воспаления и патологических процессов, в том числе кариеса. Подходит для чистки неба и внутренних поверхностей щек.

Насадки являются предметом индивидуального использования, подлежат регулярной чистке.

Режимы ирригации:



Мягкий режим, 380 кПа
Подходит для начинающих

Пульсирующий режим, 760 кПа
Для глубокого очищения зубов

Стандартный режим, 483 кПа
Для ежедневной гигиены полости рта

Режим индивидуальной настройки 380 - 760 кПа

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ирригатор «УЛЬТРА 230» KZ 1381, белый

Материал: АБС пластик, POM, ПП. Размер: 7,3x7,3x29,5 см.
Цвет: белый.
Объем резервуара для воды: 230 мл.
Частота пульсации: 1800 имп./мин.
Давление струи: 380 – 760 кПа. Время зарядки: 3 часа.
Водонепроницаемый: класс IPX7. Время работы: 20 дней.
Режим работы: мягкий, стандартный, пульсирующий и режим индивидуальной настройки DIY.
Автоматическое отключение через 1 мин 40 сек.
Функция памяти.
Работает от аккумулятора: 800 мАч.
Номинальная мощность: 5 Вт.
Напряжение зарядки: DC5 В / 1А.
Комплектация: ирригатор – 1 шт., насадки – 4 шт., USB-провод, инструкция.

Произведено по заказу «BRADEX ISRAEL. Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel. Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059, www.bradex.co.il

Импортер на территории РФ: ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru

Импортер на территории Республики Беларусь: ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д. 9 комн. 34/4, УНП 192409754. Тел: +86-574-6560937, факс: +86-574-6560938, e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com

Международная торговая марка «BRADEX».
Рег.№1419183
Израиль - Рег. №204012
Россия - Рег. №44287, №683532

Страна происхождения: Китай

Изготовитель: Джецзянь Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед.
Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Байтанг, город Нинбо, КНР, 315708.
Тел: +86-574-6560937, факс: +86-574-6560938, e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com

ТОВАР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ.

Дату производства смотрите на упаковке.
Срок эксплуатации: 1 год.
Гарантийный срок: 1 год.

Служба заботы о клиентах

