

420x148 мм
(в сложенном виде 105x148мм, гармошка)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зубная щетка электрическая «СОНИК ПЛЮС», 6 насадок, белая KZ 1546, белый
Материал: АБС пластик, ПП, нейлоновая щетка Douprnt, метал.
Размер: 2,8x2,8x25 см. Цвет: белый.
30-секундное напоминание о смене зоны.
Входное напряжение: 5 Вт. Входной ток: 2 А. Мощность: 2 В.
Время зарядки: 8 часов.
Автоматическая остановка за 2 минуты. Функция: 4 режима чистки.
Способ зарядки: зарядная станция.
Емкость аккумулятора: 2000 мАч.
Время работы: 120 дней.
Частота вибрации: 38000/мин.
Низкий уровень шума: ≤56 дБ.
Водонепроницаемый: IPX7.
Комплектация: ручка зубной щетки – 1 шт., насадка зубной щетки – 6 шт., защитный колпачок для зубной щетки – 6 шт., зарядная станция – 1 шт., инструкция.

Дату производства смотрите на упаковке.
Срок эксплуатации: 1 год.
Гарантийный срок: 1 год.

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL. Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel. Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059. www.bradex.co.il

Импортер на территории РФ: ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru

Импортер на территории Республики Беларусь: ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажных, д. 9 комн. 34/4. УНП 192409754. Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by.

Страна происхождения: Китай.

Изготовитель: Джецзян Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед. Адрес: Синьзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708. Тел: +86-574-6560937, факс: +86-574-6560938, e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com

Международная торговая марка «BRADEX».

Per.№ 1419183
Израиль – Per. № 204012
Россия – Per. № 444287, № 683532

УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ:

Ручка:
Снимите насадку щетки с ручки и протрите ее мягкой влажной тканью, затем дайте высохнуть естественным путем. Не оставляйте щетку в воде на долгое время.

Зарядная станция:
Протрите зарядную станцию мягкой влажной тканью и дайте высохнуть естественным путем. Не допускайте контакта зарядной станции с водой.

Насадка:
Почистите насадку после использования и дайте высохнуть естественным путем. Не тяните щетинки во избежание их деформации.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК:


ОПИСАНИЕ НЕПОЛАДКИ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Слабый уровень вибрации.	Сильное давление на зубы.	Ослабьте давление.
Короткое время работы.	1. Неверное размещение щетки на зарядной станции. 2. Низкий заряд батареи.	1. Убедитесь, что щетка верно подключена к зарядной станции. 2. Зарядите устройство.
Щетка не работает.	1. Неверное размещение щетки на зарядной станции. 2. Низкий заряд батареи.	1. Убедитесь, что щетка верно подключена к зарядной станции. 2. Зарядите устройство.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Данное изделие следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.



Служба заботы о клиентах

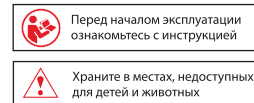

ИРРИГАТОР УЛЬТРА 800 KZ 1372



ИРРИГАТОР УЛЬТРА 230 KZ 1381

ЗУБНАЯ ЩЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОНИК ПЛЮС

BRADEX
Health & Beauty



ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
KZ 1546

BRADEXRUSSIA
 BRADEXMOSCOW

Спасибо за покупку нашей продукции. Надеемся, что электрическая зубная щетка «СОНИК ПЛЮС» станет незаменимым помощником и вы будете пользоваться ей с удовольствием. Мы прикладываем все усилия для того, что предоставить вам надежные устройства для здоровья и красоты, которые помогут сделать вашу повседневную жизнь лучше.

Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации перед использованием, чтобы вы могли использовать вашу новую электрическую зубную щётку правильно и безопасно. Компания не несёт ответственности за любые последствия, возникшие в результате несоблюдения правил эксплуатации устройства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Во время первого использования зубной щетки из-за высокой скорости движения щетинок волосков зубной щетки вы можете почувствовать раздражение или онемение. Это ощущение будет постепенно уменьшаться и перестанет вас беспокоить в течение двух дней.
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не пытайтесь усовершенствовать устройство.
- Не роняйте устройство и не допускайте физических повреждений. В случае, если устройство повреждено, не используйте его.
- Перед подключением устройства к сети проверьте, соответствует ли напряжение, установленное на устройстве, напряжению сети.
- В случае если вы в течение двух последних месяцев перенесли периодонтальную операцию, а также если ваши десны более одной недели кровоточат после использования электрической щетки проконсультируйтесь со стоматологом.
- В случае, если у вас стоит кардиостимулятор, либо имплантирован любой другой прибор, проконсультируйтесь со стоматологом перед использованием устройства.
- Используйте данное устройство только для чистки зубов, десен и языка. Не используйте его для других целей.
- Храните устройство в месте, недоступном для детей.
- Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей. Храните его в сухом и хорошо вентилируемом месте при комнатной температуре.

ВНИМАНИЕ! НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА ДО НАЧАЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

- Вы недавно перенесли периодонтальную операцию.
- У вас наблюдается кровоточивость десен.
- У вас есть незакрепленные зубные протезы.
- У вас есть любые другие медицинские обстоятельства, которые делают необходимой предварительную консультацию со специалистом. Следите за чистотой USB-кабеля, наличие на нем пыли и грязи может повлиять на процесс зарядки.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ:



ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗУБНОЙ ЩЕТКИ:

Включение:
Нажмите на кнопку, чтобы включить устройство. По умолчанию установлен режим чистки.

Смена режима:
Чтобы сменить режим, нажмите на кнопку смены режимов. При запуске включается последний работавший режим. Удерживайте кнопку в течение 1-2 сек. для смены режима.

Пользовательский режим:
В пользовательском режиме долгое нажатие на кнопку включения позволит отрегулировать уровень вибрации щетки. Выберите желаемую интенсивность и отпустите кнопку.

Запоминание режима:
Щетка имеет функцию запоминания. При включении запускается тот режим, который вы использовали последним (если щетка работала в данном режиме в течение более чем 5 сек.).

Выключение:
Если устройство работало менее 5 секунд, нажмите на кнопку, чтобы выключить его. После 2 минут работы устройство отключится автоматически.

ЗАРЯДКА:
1. Перед первым использованием не заряжайте устройство, если уровень заряда это позволяет. Зарядите устройство после того, как оно будет разряжено.
2. Когда уровень заряда составляет менее 10%, индикатор зарядки становится красным, что напоминает о необходимости зарядить зубную щетку.
3. Данное устройство заряжается при помощи зарядной станции. Для начала зарядки просто поместите его на зарядную станцию.
4. Когда устройство заряжается, индикатор горит зеленым и мигает. Когда устройство заряжено полностью, индикатор горит зеленым. Для полной зарядки требуется около 8 часов.
5. Не нажимайте кнопку включения во время зарядки устройства. Вы можете использовать его после снятия с зарядной базы.

6. Если поместить на зарядную станцию работающее устройство, оно остановит работу и начнет заряжаться.

- ВНИМАНИЕ:**
- Если щетка не работает или не включается, верните ее производителю для ремонта или замены. Во избежание несчастных случаев не разбирайте ее самостоятельно.
 - Если устройство не используется в течение длительного времени, зарядите его раз в три месяца.
 - Во избежание проблем с аккумулятором, повышения температуры, возгорания не заряжайте щетку зарядным устройством, отличающимся от стандартного зарядного устройства для данного продукта.
 - Когда индикатор зарядки станет красным, зарядите щетку как можно скорее, чтобы избежать повреждения аккумулятора и возможного сокращения срока службы.
 - Во время зарядки во избежание несчастных случаев держите устройство в недоступном для детей месте.

РЕКОМЕНДАЦИИ СТОМАТОЛОГОВ ПО ЧИСТКЕ ЗУБОВ:
Время чистки:
Рекомендованное стоматологами время чистки зубов электрической зубной щеткой – 2 минуты.

Во время чистки:
После каждых 30 секунд работы устройство делает небольшую паузу в работе, чтобы напомнить вам о необходимости смены зоны очистки для получения оптимального результата.

10 сек. чистки внешней поверхности
10 сек. чистки верхней поверхности
10 сек. чистки внутренней поверхности

Смена насадки:
Для поддержания здоровья полости рта и получения оптимального результата от чистки стоматологи рекомендуют менять насадку каждые 2-3 месяца.

