

420x148 мм
(в сложенном виде 105x148мм, гармошка)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зубная щетка электрическая «СОНИК», 2 насадки, белая KZ 1597, белый
Материал: ПП, нейлоновая щетка Dournt, АБС пластик, металл.
Размер: 2,6x2,8x24 см. Цвет: белый.
30-секундное напоминание о смене зоны.
Автоматическое отключение: 2 минуты.
Функция: 3 режима чистки.
Способ зарядки: USB-провод TYPE-C.
Емкость аккумулятора: 300 мАч. Время работы: 30 дней.
Входное напряжение: 5 Вт. Входной ток: 2 А.
Мощность: 2 В. Время зарядки: 5 часов.
Частота вибрации: 14000/мин. Низкий уровень шума: ≤56 дБ.
Водонепроницаемый: IPX7.
Комплектация: ручка зубной щетки - 1 шт., насадка зубной щетки – 2 шт., защитный колпачок для зубной щетки – 2 шт., USB-провод TYPE-C – 1 шт., инструкция.

Дату производства смотрите на упаковке.
Срок эксплуатации: 1 год.
Гарантийный срок: 1 год.

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL. Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel. Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059. www.bradex.co.il
Импортер на территории РФ: ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru

Импортер на территории Республики Беларусь: ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д. 9 комн. 34/4. УНП 192409754. Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by.

Страна происхождения: Китай.

Изготовитель: Джецзян Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед. Адрес: Синьзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708. Тел: +86-574-6560937, факс: +86-574-6560938, e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com

Международная торговая марка «BRADEX». Per.№ 1419183
Израиль – Per. № 204012
Россия – Per. № 444287, № 683532

УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ:

Ручка:
Снимите насадку щетки с ручки и протрите ее мягкой влажной тканью, затем дайте высохнуть естественным путем.
Не оставляйте щетку в воде на долгое время.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК:


ОПИСАНИЕ НЕПОЛАДКИ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Слабый уровень вибрации.	Сильное давление на зубы.	Ослабьте давление.
Короткое время работы.	1. Неполностью вставлен разъем зарядного шнура в устройство. 2. Низкий заряд батареи.	1. Убедитесь, что все разъемы установлены плотно и правильно. 2. Зарядите устройство.
Щетка не работает.	1. Неполностью вставлен разъем зарядного шнура в устройство. 2. Низкий заряд батареи.	1. Убедитесь, что все разъемы установлены плотно и правильно. 2. Зарядите устройство.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Данное изделие следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.



Служба заботы о клиентах

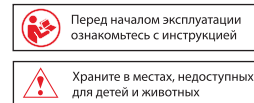

ИРРИГАТОР УЛЬТРА 800 KZ 1372



ИРРИГАТОР УЛЬТРА 230 KZ 1381



ЗУБНАЯ ЩЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОНИК

BRADEX
Health & Beauty

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
KZ 1597

BRADEXRUSSIA
 BRADEXMOSCOW



Спасибо за покупку нашей продукции.

Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации перед использованием, чтобы вы могли использовать вашу новую электрическую зубную щётку с ультразвуком правильно и безопасно. Компания не несёт ответственности за любые последствия, возникшие в результате несоблюдения правил эксплуатации устройства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Во время первого использования зубной щётки из-за высокой скорости движения щетинок волосков зубной щетки вы можете почувствовать раздражение или онемение. Это ощущение будет постепенно уменьшаться и перестанет вас беспокоить в течение двух дней.
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не пытайтесь усовершенствовать устройство.
- Не роняйте устройство и не допускайте физических повреждений. В случае, если устройство повреждено, не используйте его.
- Перед подключением устройства к сети проверьте, соответствует ли напряжение, установленное на устройстве, напряжению сети.
- В случае если вы в течение двух последних месяцев перенесли периодонтальную операцию, а также если ваши десны более одной недели кровоточат после использования электрической щетки проконсультируйтесь со стоматологом.
- В случае, если у вас стоит кардиостимулятор, либо имплантирован любой другой прибор, проконсультируйтесь со стоматологом перед использованием устройства.
- Используйте данное устройство только для чистки зубов, десен и языка. Не используйте его для других целей.
- Храните устройство в месте, недоступном для детей. Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей. Храните его в сухом и хорошо вентилируемом месте при комнатной температуре.

ВНИМАНИЕ!

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА ДО НАЧАЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

- Вы недавно перенесли периодонтальную операцию.
- У вас наблюдается кровоточивость десен.
- У вас есть незакрепленные зубные протезы.
- У вас есть любые другие медицинские обстоятельства, которые де-

лают необходимой предварительную консультацию со специалистом.

Отключайте питание устройства, когда оно не заряжается или во время ухода за ним.
Следите за чистотой USB-кабеля, наличие на нем пыли и грязи может повлиять на процесс зарядки.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ:



ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗУБНОЙ ЩЕТКИ:

Включение:
Нажмите на кнопку, чтобы включить устройство. По умолчанию установлен режим чистки.

Смена режима:

Чтобы сменить режим, нажмите на кнопку включения через 5 сек. после начала работы устройства. Каждое последующее нажатие будет переключать режим работы.

Запоминание режима:

Щетка имеет функцию запоминания. При включении запускается тот режим, который вы использовали последний (если щетка работала в данном режиме в течение более чем 5 сек.).

Выключение:

Если устройство работало менее 5 секунд, нажмите на кнопку, чтобы выключить его. После 2 минут работы устройство отключится автоматически.

ЗАРЯДКА:

- Перед первым использованием устройство можно не заряжать, если уровень заряда это позволяет. Зарядите устройство после того, как оно будет разряжено.
- Когда уровень заряда составляет менее 10%, индикатор зарядки становится красным, что напоминает о необходимости зарядить зубную щетку.
- Данное устройство заряжается при помощи USB-кабеля с разъемом TYPE-C.
- Когда устройство заряжается, индикатор горит зеленым и мигает. Когда устройство заряжено полностью, индикатор горит зеленым. Для полной зарядки требуется около 5 часов.
- НЕ нажимайте кнопку включения во время зарядки устройства. Вы можете использовать его после отключения USB-кабеля.
- Если подключить USB-кабель во время работы щетки, она перестает работать и начинает заряжаться.
- После полной зарядки отсоедините USB-кабель. Вставьте резиновую заглушку в разъем во избежание попадания воды внутрь прибора.

ВНИМАНИЕ:

- Если щетка не работает или не включается, верните ее производителю для ремонта или замены. Во избежание несчастных случаев не разбирайте ее самостоятельно.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его раз в три месяца.
- Во время зарядки щетка будет нагреваться. Ее температура при этом не должна превышать 40 градусов Цельсия.
- Когда индикатор зарядки станет красным, зарядите щетку как можно скорее, чтобы избежать повреждения аккумулятора и возможного сокращения срока службы.
- Во время зарядки во избежание несчастных случаев держите устройство в недоступном для детей месте.


РЕКОМЕНДАЦИИ СТОМАТОЛОГОВ ПО ЧИСТКЕ ЗУБОВ:

Время чистки:
Рекомендованное стоматологами время чистки зубов электрической зубной щеткой – 2 минуты.

Во время чистки:

После каждых 30 секунд работы устройство делает небольшую паузу в работе, чтобы напомнить вам о необходимости смены зоны очистки для получения оптимального результата.

- 10 сек. чистки внешней поверхности
- 10 сек. чистки верхней поверхности
- 10 сек. чистки внутренней поверхности

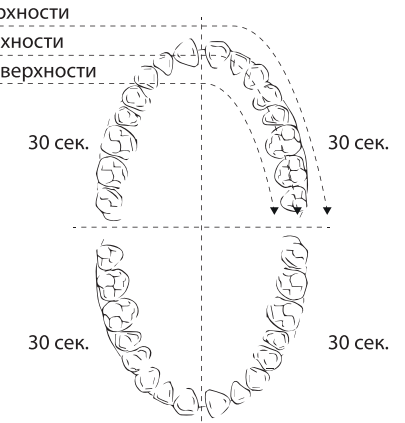

Смена насадки:

Для поддержания здоровья полости рта и получения оптимального результата от чистки стоматологи рекомендуют менять насадку каждые 2-3 месяца.