

BRADEx™
Fitness

МАССАЖНЫЙ ВАЛИК

С ВИБРАЦИЕЙ

SF 0373

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



Перед применением проконсультируйтесь с врачом.





Перед началом эксплуатации
ознакомьтесь с инструкцией

Массажный валик поможет вам подготовиться к тренировке и снять напряжение после. Встроенная функция вибрации без лишних усилий разогревает глубокие мышцы, снижает риск травм и способствует быстрому восстановлению. Вам нужно лишь выбрать подходящий режим. Благодаря оптимальному размеру валик удобно использовать и носить с собой. Наслаждайтесь глубоким массажем до и после тренировки, когда и где вам удобно.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Способствует улучшению кровообращения.
- Эффективно разогревает мышцы.
- Снимает напряжение в теле.
- 4 уровня вибрации.
- Время работы аккумулятора в зависимости от режима – от 50 до 180 мин.
- Максимальная нагрузка до 150 кг.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

	Храните в местах, недоступных для детей и животных.
	Храните вдали от нагревательных приборов в сухом месте.

ВОЗНИКШИЕ ПРОБЛЕМЫ

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ

Нет вибрации	Проверьте заряд аккумулятора. Проверьте нажата ли кнопка включения/выключения
Слабая вибрация	Нажмите кнопку включения/выключения еще раз. Проверьте заряд аккумулятора
Внезапно прекратилась работа	Сработало автоматическое выключение после 10 минут использования

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Прекратите использование при возникновении дискомфорта.
- Не используйте при повреждении массажного валика, зарядного устройства или адаптера.
- Не погружайте валик или зарядное устройство в воду.
- Просушите при попадании воды.
- Не используйте в состоянии алкогольного опьянения и при плохом самочувствии.
- Не используйте более 15 минут за 1 раз.
- Избегайте падения валика на пол.
- Не используйте во время беременности.
- Не разбирайте валик.
- Не ремонтируйте валик и зарядное устройство самостоятельно.
- Не используйте розетку с другим номинальным напряжением.
- Не сгибайте и не перекручивайте провод зарядного устройства.
- При поломке не разбирайте зарядное устройство или массажный валик.
- Используйте оригинальное зарядное устройство.
- Не давайте детям играть с валиком.
- Не используйте валик во время зарядки.




Массажный валик имеет литий-ионный тип аккумулятора

Li-ion

ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Валик имеет 4 степени интенсивности вибрации:

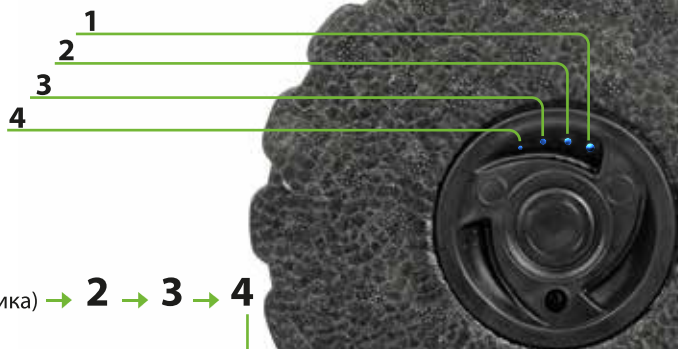

1 (Включение валика) → **2** → **3** → **4**


Выключение валика ←

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Не используйте валик если есть противопоказания к применению.
Воздержитесь от использования валика в период беременности и лактации.
После травмы или болезни перед использованием валика проконсультируйтесь с врачом.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА:

1. Корпус
2. Панель управления
3. Кнопка включения/ выбор режима/ выключения
4. Световые индикаторы интенсивности массажа (4 шт.)
5. Разъем для зарядного устройства

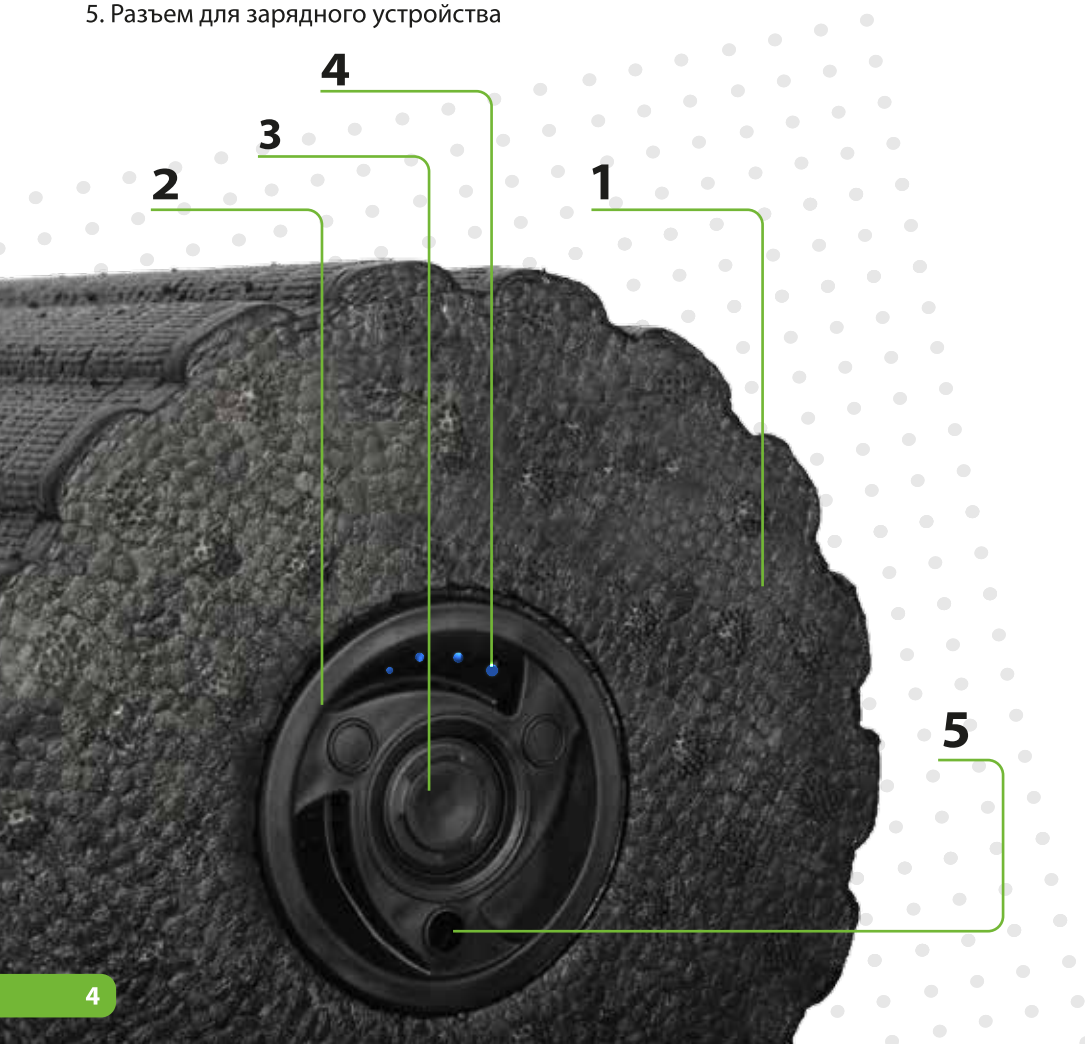

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Перед первым использованием зарядите аккумулятор массажного валика. Нажмите кнопку включения. Повторное нажатие – выбор интенсивности и выключение функции массажа.



Планка. Для разогрева верхней поверхности бедра.

**РАСКАТЫВАЙТЕ МЫШЦЫ
В РАЗНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ,
ИСПОЛЬЗУЯ ВАЛИК.**



Упор сидя. Расположите валик под икрами для эффективности проработки мышцы голеностопа и голени.



Сидя на валике, согните ноги, упирайтесь руками в пол. Расположите валик под ягодицами.



Ягодичный мостик. В таком положении удобно прокатывать плечевой пояс и мышцы шеи. Это деликатная зона, будьте осторожны!

СПОСОБЫ ОЧИСТКИ:

При загрязнении протрите слегка влажной тряпкой.
Не использовать абразивные и агрессивные моющие средства.
Не допускать попадания влаги.



Данное изделие следует утилизировать
отдельно от бытовых отходов

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: ПВХ, металл.

Цвет: черный.

Размер/объем: 15 см х 31 см.

Максимальная нагрузка: 150 кг.

Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор: 7,4 В, 2200 мА/ч.

4 скорости работы:

2300 об/мин

2700 об/мин

3100 об/мин

3700 об/мин

Время до полной зарядки: 3,5 часа (при полной разрядке)

Время работы на максимальном режиме: 50 мин

Время работы на минимальном режиме: 180 мин

Фиксированное время работы – 10 минут

Вес – 750 г.

Температурный режим: 10°C - 40°C


КОМПЛЕКТАЦИЯ:



Валик – 1 шт.



Зарядное устройство – 1 шт.

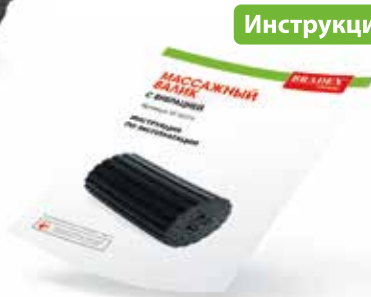

Инструкция

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ АККУМУЛЯТОРА:

1. Присоедините зарядное устройство к массажному валику.
2. Зарядка начнется автоматический
3. При зарядке по очереди загорается индикатор
4. При полной зарядке все индикаторы горят постоянно
5. После полной зарядке, зарядное устройство следует отсоединить от массажного валика

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПРИСОЕДИНЁННОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО БЕЗ ПРИСМОТРА.
НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ МАССАЖНЫЙ ВАЛИК ПРИ ПРИСОЕДИНЕННОМ ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ.

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.

Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel. Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059. www.bradex.co.il.

Импортер на территории РФ: ООО «Технологии здоровья».

Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru.

Импортер на территории Республики Беларусь: ТУП «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д.9 комн.34/4, УНП 192409754, email: optbel1@bradex.ru.

Страна происхождения: Китай. Производитель: Джецзян Нью Вижн

Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед. Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708. тел:

+86-574-6560937, факс:+86-574-6560938. e-mail:

zhejiangnewvision.china@gmail.com.

Международная торговая марка «BRADEX».

Reg. №1419183.

Израиль - Reg. №204012.

Россия - Reg. №444287, №683532

EAC

Срок эксплуатации: 1 год.

Дату производства смотрите на упаковке.